



Hold-n-Place® Višenamjenski Držać Cjevčice

Opis Proizvoda

Nježan za kožu i prozračan držać uz mogućnost lijepljenja, za veliki raspon katetera i cjevčica od 12fr do 40fr. Držać se na cjevčicu može postaviti lijepljenjem ili bez lijepljenja.

Upute za Primjenu

1. Očistite i pripremite površinu za primjenu. Primijenite na čistu, suhu kožu.
2. Otvorite držać Dale Hold-n-Place tako da su osnovne trake postavljene vodoravno, a središnja traka okrenuta prema gore. **(A)**
3. Uklonite zaštitnu foliju da otvorite ljepljivi dio i postavite ga na kožu. **(A)**
4. Ne uklanjajte zaštitnu foliju sa središnje traku za fiksiranje cjevčice bez lijepljenja **ILI** uklonite zaštitnu foliju za fiksiranje lijepljenjem. **(A)**
5. Cjevčicu postavite na kraj središnje trake i traku čvrsto prebacite oko cjevčice te je pričvrstite na osnovnu traku. **(B)**
6. Za fiksiranje Foleyeva katetera postavite port Y bližeg kraja Foleyeva katetera na središnju traku, prebacite ga i pričvrstite na osnovnu traku. **(C)**

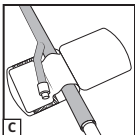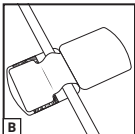

Dodatne Prednosti

- Može se koristiti za niz cjevčica poput cjevčica za prsni koš, Jackson-Pratt drena, Foleyeva katetera, drenažnih cjevčica, PEG cjevčica i port katetera
- Površina prikladna za pisanje.
- Traje do 7 dana.

Za uporabu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Video s uputama za primjenu nalazi se na www.dalemed.com.

Medicinski proizvodi Dale na raspolaganju su kod vašeg odabranog dobavljača bolničkog/medicinskog materijala.

Ne sadrži prirodni gumeni lateks.

Patent : www.dalemed.com/patents

Dale i Hold-n-Place registrirani su žigovi tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU-u i UK-u.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

