




Hold-n-Place® Universalsondeholder

Produktbeskrivelse

En hudvenlig, åndbar sondeholder med klæbebagside til fiksering af en lang række katetre og sonder fra størrelse 12 F op til 40 F. Kan bruges enten med eller uden klæbefiksering rundt om sonden.

Anbringelse

1. Rens og klargør det sted, hvor holderen skal anbringes. Den skal anbringes på ren, tør hud.
2. Åbn Dale Hold-n-Place, så de selvklæbende stykker ligger fladt ud til siderne, og midterfligen sidder opret. **(A)**
3. Træk bagpapiret af stykkernes selvklæbende side, og anbring stykkerne på huden. **(A)**
4. Lad midterfligen sidde, så den kan lægges løst rundt om sonden uden at klæbe den fast, **ELLER** tag bagpapiret af fligen og anvend klæbesiden. **(A)**
5. Anbring sonden langs bunden af midterfligen, og fold fligen tæt rundt om sonden. Fastgør burrebåndet. **(B)**
6. Foley-katetret fikseres ved at anbringe Y-porten på Foley-katetrets proksimale ende på midterfligen, og folde fligen over katetret. **(C)**

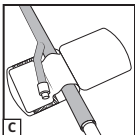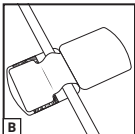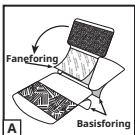

Ekstra Fordele

- Kan bruges til at fikserer mange forskellige sonder, såsom: pleuradræn, Jackson Pratt-dræn, Foley-katetre, drænslinger, PEG-sonder og multiportkatetre.
- Overflade man kan skrive på.
- Kan sidde på i op til 7 dage.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilætex.

Patent: www.dalemed.com/patents

Dale og Hold-n-Place er registrerede varemærker, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

