



Hold-n-Place® Multifunctionele Slanghouder

Productbeschrijving

Een huidvriendelijke, ademende houder met zelfklevende achterzijde waarmee een breed scala aan katheters, slangen en sondes van 12 fr tot 40 fr kan worden vastgezet. Wikelt rondom de slang en zet deze klevend of kleefvrij vast.

Instructies voor het Aanbrengen

1. De plaats van aanbrenging reinigen en voorbereiden. Op schone, droge huid aanbrengen.
2. Open de Dale Hold-n-Place zodanig dat de beschermstroken van de basis horizontaal liggen en de middenflap rechtop staat. **(A)**
3. Verwijder de beschermstroken van de basis zodat de kleeflaag bloot komt te liggen. Op de huid bevestigen. **(A)**
4. Laat de beschermstrook van de middenflap op zijn plaats zitten om de slang kleefvrij vast te zetten **OF** verwijder de strook om de kleeflaag bloot te leggen. **(A)**
5. Plaats de slang op het onderste deel van de middenflap, wikkel de flap stevig om de slang en druk de klittenbandhaakjes van de flap op de klittenbandlusjes van de basis. **(B)**
6. Om een Foley-katheter vast te zetten, plaatst u de proximale Y-poort van de Foley-katheter op de middenflap en slaat u de flap om de katheterslang. **(C)**

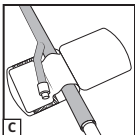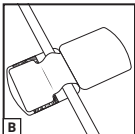

Extra Voordelen

- Kan een breed scala aan slangen vastzetten: thorax-, Jackson-Pratt- en andere drains, Foley-katheters, PEG-sondes en katheters met meerdere poorten.
- Beschrijfbaar oppervlak.
- Gaat tot 7 dagen mee.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com.

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische producten.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Octrooi www.dalemed.com/patents.

Dale en Hold-n-Place zijn gedeponeerde handelsmerken van Dale Medical Products, Inc. in de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

