




Hold-n-Place® Monikäyttöinen Letkunpidin

Tuotteen Kuvaus

Ihoystävällinen, hengittävä, liimapintainen pidike kiinnittää monenlaisia katetreja ja letkuja, joiden koko on 12–40 F. Voidaan kiinnittää letkun ympärille joko liimapinnan avulla tai ilman liimapintaa.

Kiinnitysohjeet

1. Puhdista ja valmistele kiinnitysalue. Kiinnitä kuivalle, puhtaalle iholle.
2. Avaa Dale Hold-n-Place niin, että pohjan taustapaperit ovat vaakatasossa ja keskikieleke on pystyssä. **(A)**
3. Poista taustapaperit liimapinnalta ja kiinnitä ihoon. **(A)**
4. Jätä keskikielekkeen taustapaperi paikalleen, jos kiinnitys letkun ympärille halutaan tehdä liimapintaa käyttämättä, **TAI** poista kielekkeen taustapaperi, jotta letkun liimapinta tulee näkyviin. **(A)**
5. Aseta letku keskikielekkeen pohjaan ja kiedo kieleke lujasti letkun ympärille ja liitä kielekkeen tarranauhakiinnitin pohjan tarranauhakiinnittimeen. **(B)**
6. Jos kiinnität Foley-katetrin, aseta Foley-katetrin proksimaalipään Y-portti keskikielekkeeseen ja kiinnitä taivuttamalla kieleke. **(C)**

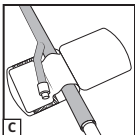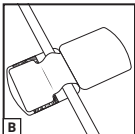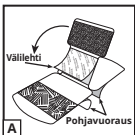

Lisäetuja

- Kiinnittää monenlaisia letkuja, kuten pleuradreeneja, Jackson-Pratt-dreeneja, Foley-katetreja, dreniletkuja, PEG-letkuja ja moniporttikatetreja.
- Kirjoitettava pinta.
- Kestää jopa 7 päivää.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

Patentti www.dalemed.com/patents

Dale ja Hold-n-Place ovat Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

