

Hold-n-Place® Support de Sonde Polyvalent


Description du Produit

Un support adhésif, respirant et doux pour la peau, permet de fixer une grande variété de cathéters et de sondes de 12fr à 40fr. Permet une fixation adhésive ou sans adhésif autour de la sonde.


Consignes d'Utilisation

1. Nettoyer et préparer la zone d'application. Appliquer sur peau propre et sèche.


2. Ouvrir le support de sonde Hold-n-Place Dale de façon à ce que les doublures de base soient à plat et que la languette centrale soit à la verticale. **(A)**

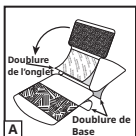

3. Retirer le revêtement de la base pour exposer l'adhésif et l'appliquer sur la peau. **(A)**

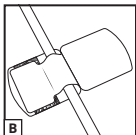

4. Laisser le revêtement de la languette centrale en place pour une fixation sans adhésif autour de la sonde **OU** retirer le revêtement de la languette pour exposer l'adhésif de la sonde. **(A)**

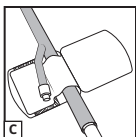

5. Placer la sonde au bas de la languette centrale et enrouler solidement la languette autour de la sonde, puis joindre l'extrémité du crochet de la languette à la partie en boucle de la base. **(B)**

6. Pour fixer la sonde de Foley, placer l'orifice Y de l'extrémité proximale de la sonde de Foley sur

7. la languette centrale et rabattre la languette pour l'attacher. **(C)**

Avantages Supplémentaires

- Sécurise une grande variété de sondes tels que : sondes thoraciques, Jackson-Pratt, sondes de Foley, tubes de drainage, tubes PEG et cathéters multiport.
- Surface inscriptible.
- Durée de vie jusqu'à 7 jours.

Produit à usage unique. Jetable.

Pour voir une vidéo de démonstration, rendez-vous sur le site : www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont vendus par vos distributeurs de fournitures médicales/hospitalières préférés.

Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.

Brevet www.dalemed.com/patents

Dale et Hold-n-Place sont des marques déposées aux États-Unis, dans l'UE et au R.-U. de Dale Medical Products, Inc.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

