




Hold-n-Place® Mehrzweck-Schlauchhalter

Produktbeschreibung

Ein hautfreundlicher, luftdurchlässiger Halter mit selbstklebender Unterlage zur Befestigung einer vielfältigen Auswahl von Kathetern und Schläuchen mit French-Größen von 12 Fr bis 40 Fr. Ermöglicht eine sichere Befestigung um den Schlauch mit oder ohne Haftmaterial.

Anwendungshinweise

1. Den Anwendungsbereich reinigen und vorbereiten. Auf sauberer, trockener Haut anbringen.
2. Den Dale Hold-n-Place so öffnen, dass die Unterlage-Abziehfolien flach liegen und die mittlere Lasche aufrecht positioniert ist. **(A)**
3. Die Unterlage-Abziehfolien entfernen, um die Haftfläche freizulegen, und den Halter auf der Haut anbringen. **(A)**
4. Die Abziehfolie der mittleren Lasche angebracht lassen, um eine Befestigung ohne Haftmaterial um den Schlauch herum zu ermöglichen, **ODER** die Lasche entfernen, um das Haftmaterial für den Schlauch freizulegen. **(A)**
5. Den Schlauch unten an der mittleren Lasche platzieren, die Lasche fest um den Schlauch wickeln und das Klettverschlussende der Lasche mit dem Schlaufenabschnitt an der Unterlage verbinden. **(B)**
6. Zum Befestigen des Foley-Katheters den Y-Anschluss des proximalen Endes des Foley-Katheters auf der mittleren Lasche platzieren und über die Lasche falten. **(C)**

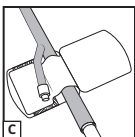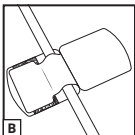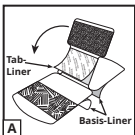

Zusätzliche Vorteile

- Zur Befestigung einer vielfältigen Auswahl von Schlauchvorrichtungen wie Thoraxdrainagen, Jackson-Pratt-Drainagen, Foley-Kathetern, Drainageschläuchen, PEG-Sonden und Mehrwegkathetern.
- Beschreibbare Oberfläche.
- Kann bis zu 7 Tage angebracht bleiben.

Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

Patent siehe www.dalemed.com/patents

Dale und Hold-n-Place sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien. in the USA, EU, and UK



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

