



Hold-n-Place® 多目的チューブホルダー

製品説明

肌に優しく通気性のあるこのホルダーの背面には粘着部があり、12 Fr～40 Frまでの様々なカテーテルやチューブの固定に使用できます。チューブは、粘着部を使用または使用せず固定することができます。

使用手順

1. 貼付部を清潔で濡れていない皮膚に貼付します。
2. Dale社のホルダーを開け、ベース剥離紙を平たくし、中央タブが立つようにします。(A)
3. ベース剥離紙を剥がして粘着部を皮膚に貼付します。(A)
4. 粘着部を使用せずチューブを固定するには、中央タブの剥離紙をそのままにします。チューブを固定する粘着部を使用する場合は、タブの剥離紙を剥がします。(A)
5. チューブを中央タブの底部に置き、タブをチューブ周りに貼り固定します。ベースのループ部分にタブのフック部を合わせます。(B)
6. フォーリーカテーテルを固定するには、フォーリーカテーテルのY字の根本を中央タブに合わせ、タブをチューブ周りに固定します。(C)

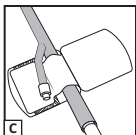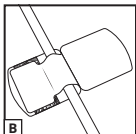

追加の特長

- 胸腔チューブ、ジャクソン・プラット、フォーリーカテーテル、排液チューブ、PEGチューブ、マルチポートカテーテルなど様々なチューブの固定に使用できます。
- 表面に書き込み可能。
- 最長7日間まで使用可。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取り扱い説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

特許 www.dalemed.com/patents

DaleとHold-n-Placeは米国、欧州連合、英国のDale Medical Products, Inc.の登録商標です。



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

