

Hold-n-Place®



(제자리 고정용) 다용도 튜브 홀더

제품 설명서

피부 친화적이고, 통기성이 뛰어난, 뒷면 접착식 홀더는 12fr에서 40fr까지 다양한 카테터 및 튜브를 안전하게 고정합니다. 튜브 주위에 접착식 또는 비접착식으로 고정할 수 있게 합니다.

적용 방법

1. 적용 부위를 깨끗하게 준비합니다. 깨끗하고 건조한 피부에 적용합니다.
2. Dale Hold-n-Place를 펼쳐 바닥 라이너가 평평하게 놓이고 중앙 탭이 똑바로 세워지도록 합니다. (A)
3. 바닥 라이너를 제거하여 접착면을 노출시키고 피부에 적용합니다. (A)
4. 튜브 주위에 비접착식으로 고정하려면 중앙 탭 라이너를 그대로 두고, 접착식으로 고정하려면 탭 라이너를 제거하여 튜브 접착면을 노출시킵니다. (A)
5. 튜브를 중앙 탭 하단에 놓고 탭을 튜브 주위에 단단히 감싸며 탭 후크 끝을 바닥의 루프 부분에 연결합니다. (B)
6. 폴리 카테터를 고정하려면, 폴리 카테터의 근위단 Y 포트를 중앙 탭에 놓고 탭을 접어 고정합니다. (C)

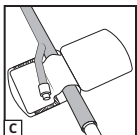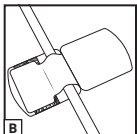

추가 이점

- 흉관, 잭슨-프랫(Jackson-Pratt) 및 폴리(Foley) 카테터, 배액 튜브, PEG 튜브 및 다중 포트 카테터 등 다양한 튜브를 안전하게 고정합니다.
- 표면에 글씨를 쓸 수 있습니다.
- 최대 7일 동안 지속됩니다.

단일 환자용. 1회용.

적용 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

Dale 의료 제품은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

특허 www.dalemed.com/patents

Dale & Hold-n-Place는 미국, 유럽 연합 및 영국에 등록된 Dale Medical Products, Inc.의 상표입니다.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

