



Hold-n-Place® Slangeholder til Universalbruk

Produktbeskrivelse

Hudvennlig, pustende og selvklebende holder til fiksering av mange ulike typer katetre og slanger fra 12 til 40 Fr. Fikseringen legges rundt slangen, med eller uten klebing.

Påsettingsanvisninger

1. Rengjør og klargjør påsettingsområdet. Påføres ren, tørr hud.
2. Åpne Hold-n-Place fra Dale slik at dekkpapirene i bunnen ligger flatt og den midterste fliken står rett opp. **(A)**
3. Fjern dekkpapirene i bunnen for å eksponere limet, og sett holderen på huden. **(A)**
4. La dekkpapiret på den midterste fliken bli sittende på hvis slangen skal fikseres klebefritt, **ELLER** fjern dekkpapiret på fliken for å eksponere slangelimet. **(A)**
5. Plasser slangen i bunnen av den midterste fliken, vikle fliken godt rundt slangen og fest flikens krokende til bunnens løkkedel. **(B)**
6. Fikser et Foley-kateter ved å legge Y-porten i Foley-kateterets proksimale ende på den midterste fliken og brette fliken over for å feste den. **(C)**

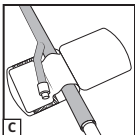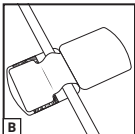

Flere Fordeler

- Kan brukes til å fikse mange ulike typer slanger, f.eks. thoraxdren, Jackson-Pratt-dren, Foley-katetre, drenslanger, PEG-sonder og katetre med flere porter.
- Påskrivbar overflate.
- Varer i opptil 7 dager.

Til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com.

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Ikke produsert med naturgummilateks.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale og Hold-n-Place er registrerte varemerker som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

