



Hold-n-Place® Wielofunkcyjny Uchwyt na Rurki

Opis WYROBU

Przyjazna dla skóry, przepuszczająca powietrze, przyklepna nakładka służy do zabezpieczenia rozmaitych typów cewników i rurek o średnicy od 12 fr. do 40 fr. Zapewnia przyklepne lub wolne od kleju zabezpieczenie wokół rurki.

Instrukcja Zakładania

1. Oczyszczyć i przygotować obszar założenia. Nałożyć na czystą i suchą skórę.
2. Otworzyć nakładkę Dale Hold-n-Place tak, aby podkładki bazowe były rozłożone płasko, a środkowa wypustka była skierowana ku górze. **(A)**
3. Usunąć podkładki bazowe, aby odsłonić stronę przyklepną i umieścić na skórze. **(A)**
4. W celu wolnego od kleju zabezpieczenia rurki nie usuwać podkładki środkowej wypustki; **LUB** usunąć ją, aby odsłonić klej i przykleić. **(A)**
5. Umieścić rurkę u dołu środkowej wypustki, dokładnie owinąć wypustkę wokół rurki i przymocować jej haczykowany koniec do obszaru z pętelkami podkładki bazowej. **(B)**
6. Aby zamocować cewnik Foley'a, umieścić port Y znajdujący się na proksymalnym końcu cewnika na środkowej wypustce i zabezpieczyć go wypustką. **(C)**

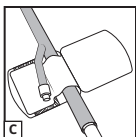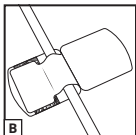

Dodatkowe Zalety

- Możliwość zabezpieczenia wielu rodzajów rurek, np.: rurki klatki piersiowej, dreny Jackson-Pratt, cewniki Foley'a, rurki do drenażu, rurki PEG i cewniki wieloportowe.
- Powierzchnia umożliwiająca oznaczenie pismem.
- Trwałość do 7 dni.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku.

Wideo z instrukcją zakładania dostępne jest na stronie www.dalemed.com

Wyroby medyczne Dale można nabyć u swojego preferowanego dealera produktów szpitalnych/medycznych.

Nie zawiera lateksu naturalnego.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale i Hold-n-Place są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dale Medical Products, Inc. w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

