



Hold-n-Place® Fixador de Tubos Multifuncional

Descrição do Produto

Fixador com adesivo que permite a ventilação, não agride a pele e prende uma grande variedade de cateteres e tubos de 12Fr a 40Fr. Permite a fixação com ou sem adesivo ao redor do tubo.

Instruções de Aplicação

1. Limpe e prepare a área de aplicação. Aplique sobre a pele limpa e seca.
2. Abra o Dale Hold-n-Place de forma que a película protetora da base fique plana e a aba central erguida. **(A)**
3. Remova a película protetora da base para expor o adesivo e aplique sobre a pele. **(A)**
4. Mantenha a película protetora da aba central para fixação sem adesivo ao redor do tubo **OU** remova a película protetora da aba para expor o adesivo do tubo. **(A)**
5. Posicione o tubo na parte inferior da aba central, enrole firmemente a aba ao redor do tubo e junte a extremidade do gancho da aba à parte do laço na base. **(B)**
6. Para fixar o cateter de Foley, posicione o conector em Y da extremidade proximal do cateter sobre a aba central e dobre a aba para fixá-lo. **(C)**

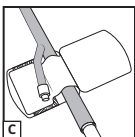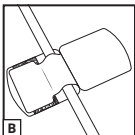

Outros Benefícios

- Fixa com segurança uma grande variedade de tubos, como: tubos torácicos, drenos Jackson-Pratt, cateteres de Foley, tubos de drenagem, tubos de gastrostomia (PEG) e cateteres com múltiplos lumens.
- Superfície apropriada para escrita.
- Dura até 7 dias.

Para uso em um único paciente. Descartável.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, acesse www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não contém látex de borracha natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale e Hold-n-Place são marcas registradas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, na UE e no Reino Unido.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

