



Hold-n-Place® Soporte Multipropósito para Tubos

Descripción del Producto

Soporte adhesivo respirable y benigno para la piel para fijar una amplia variedad de sondas y tubos de calibres 12 Fr a 40 Fr. Sujeta el tubo con o sin adhesivo.

Instrucciones de Uso

1. Limpie y prepare el área. Aplique el producto sobre piel limpia y seca.
2. Abra el Dale Hold-n-Place de forma que las bases queden planas y la lengüeta central quede vertical. **(A)**
3. Quite las películas protectoras de las bases para exponer el adhesivo, y aplique el producto a la piel. **(A)**
4. Deje la película protectora de la lengüeta central (para sujeción sin adhesivo), o quítela para exponer el adhesivo. **(A)**
5. Coloque el tubo en la parte inferior de la lengüeta central envolviéndolo firmemente con la lengüeta, y junte el extremo de ganchos con la porción de bucles de la base. **(B)**
6. Para fijar una sonda Foley, coloque el puerto bifurcado del extremo proximal de la sonda sobre la lengüeta central, y repliegue la lengüeta para fijarlo. **(C)**

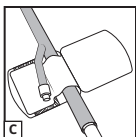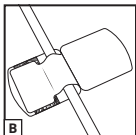

Beneficios Adicionales

- Sujeta una gran variedad de tubos, por ejemplo: tubos torácicos, tubos de Jackson-Pratt, sondas Foley, tubos de drenaje, tubos PEG, y sondas con múltiples vías de acceso.
- Se puede escribir sobre la superficie.
- Dura hasta 7 días.

Para uso en un solo paciente. Desechable.

Para ver un vídeo sobre cómo utilizar el producto, visita www.dalemed.com.

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos médicos o para hospitales.

Fabricado sin látex de goma natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale y Hold-n-Place son marcas comerciales registradas de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU., la UE y el RU.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

