




Hold-n-Place® Universalhållare för Kateter/Slang

Produktbeskrivning

En hudvänlig, självhäftande hållare som andas, som används för att säkra en rad olika katetrar och slangar från 12 till upp till 40 Fr. Kan användas antingen med eller utan självhäftande fastsättning runt katetern/slangen.

Appliceringsanvisningar

1. Rengör och preparera området där hållaren ska placeras. Placera den på ren och torr hud.
2. Öppna Dale Hold-n-Place så att de undre skyddsremarna ligger plant och mittfliken är uppåtvänd. **(A)**
3. Dra bort de undre skyddsremarna så att den självhäftande ytan exponeras och sätt fast den på huden. **(A)**
4. Låt skyddsremsan på mittfliken sitta kvar på plats för häftfri fastsättning runt katetern/slangen **ELLER** dra bort skyddsremsan från fliken för att exponera den självhäftande ytan för katetern/slangen. **(A)**
5. Placera katetern/slangen längst ned på mittfliken, linda fliken stadigt runt katetern/slangen och sätt fast flikens kardborreände på underdelens kardborredel. **(B)**
6. För att säkra en Foley-kateter, placera Y-porten i Foley-kateterns proximala ände på mittfliken och vik över fliken för att sätta fast den. **(C)**

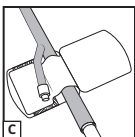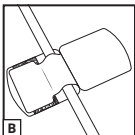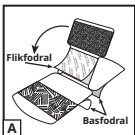

Ytterligare Fördelar

- Säkrar en rad olika katetrar/slangar såsom: thoraxdrän, Jackson-Pratt-drän, Foley-katetrar, dränageslangar, PEG-katetrar och katetrar med flera portar.
- Yta som går att skriva på.
- Varar i upp till 7 dagar.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt.

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale och Hold-n-Place är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

