



Hold-n-Place® ที่ยึดสายอเนกประสงค์

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ที่ยึดแบบแผ่นกาวที่ระบายอากาศได้และเป็นมิตรต่อผิวหนัง ช่วยยึดสายสวนและท่อหลากหลายประเภท ตั้งแต่ขนาด 12fr จนถึง 40fr มีให้เลือกทั้งแบบมีแผ่นกาวหรือไม่มีแผ่นกาวติดรอบท่อ

ข้อแนะนำการใช้งาน

1. ทำความสะอาดและเตรียมผิวบริเวณที่จะใช้ ให้ใช้กับผิวหนังที่สะอาดและแห้ง
2. แกะ Dale Hold-n-Place ออกโดยให้แผ่นรองฐานวางราบและแถบตรงกลางตั้งขึ้น (A)
3. ดึงแผ่นรองฐานออกเพื่อให้เห็นแผ่นกาว แล้วแปะลงบนผิวหนัง (A)
4. ปลดแผ่นรองแถบตรงกลางไว้อย่างเดิมเพื่อยึดท่อโดยไม่ใช้กาว หรือดึงแผ่นรองแถบออกเพื่อให้เห็นแผ่นกาวสำหรับยึดท่อ (A)
5. วางท่อที่ด้านล่างของแถบตรงกลาง แล้วพันแถบรอบท่อให้แน่น และเชื่อมต่อปลายหัวของแถบกับส่วนหัวบนฐาน (B)
6. ในการยึดสายสวน Foley ให้วางพอร์ต Y ของปลายส่วนต้นของสายสวน Foley ลงบนแถบตรงกลาง แล้วพับแถบกับลงมาเพื่อยึดให้แน่น (C)

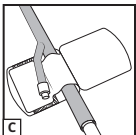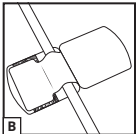

ประโยชน์เพิ่มเติม

- ยึดท่อได้หลากหลายชนิด เช่น สายระบายทรวงอก Jackson-Pratt สายสวน Foley ท่อระบาย สายให้อาหารทางหน้าท้อง และสายสวนแบบหลายพอร์ต
- มีพื้นผิวที่สามารถเขียนได้
- มีอายุการใช้งานนานถึง 7 วัน

ใช้สำหรับผู้ป่วยคนเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแนะนำการใช้งาน โปรดดูที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาลหรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ท่านเลือก

ไม่ได้ผลิตจากนํ้ายางธรรมชาติ

สิทธิบัตร www.dalemed.com/patents

Dale & Hold-n-Place เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

