




Hold-n-Place® Çok Amaçlı Tüp Sabitleme Bandı

Ürün Açıklaması

Cilt dostu, nefes alabilen, arkası yapışkanlı Sabitleme Bandı, 12fr'den 40fr'ye kadar çok çeşitli kateterleri ve tüpleri sabitler. Tüpün çevresine yapışkanlı veya yapışkansızsarılarak sabitlenmesini sağlar.

Uygulama Talimatları

1. Uygulama alanını temizleyin ve hazırlayın. Temiz ve kuru cilde uygulayın.
2. Dale Hold-n-Place'i tabandaki astarlar düz gelecek ve ortadaki şerit dik olacak şekilde açın. **(A)**
3. Tabandaki astarları çıkararak yapışkanı açığa çıkarın ve cilde uygulayın. **(A)**
4. Tüpün etrafını yapışkan kullanmadan sararak sabitlemek için ortadaki şeridin astarını çıkarmayın **VEYA** tüpün yapışkanını kullanmak için şeridin astarını çıkarın. **(A)**
5. Tüpü ortadaki şeridin alt kısmına yerleştirerek şeridi tüpün etrafına sıkıca sarın ve şeridin cırt cırtlı ucunu tabandaki cırt cırtlı kısma sabitleyin. **(B)**
6. Foley kateteri sabitlemek için, Foley kateterinin proksimal ucundaki Y girişini ortadaki şeridin üzerine koyun ve sabitlemek için şeridi üzerine katlayın. **(C)**

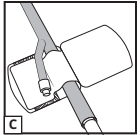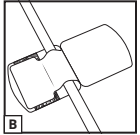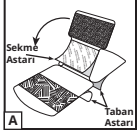

Ek Faydalar

- Göğüs tüpleri, Jackson-Pratt, Foley kateterleri, drenaj boruları, PEG tüpleri ve çok kanallı kateterler gibi çeşitli tüpleri güvenli bir şekilde sabitler.
- Yazılabilir yüzey.
- En fazla 7 gün dayanır.

Tek hastada kullanım içindir. Tek kullanımlıktır.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com adresini ziyaret edin.

Dale tıbbi ürünleri, tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden bulabilirsiniz.

Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale ve Hold-n-Place, Dale Medical Products, Inc.'in ABD, AB ve Birleşik Krallık'taki tescilli ticari markalarıdır.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

