
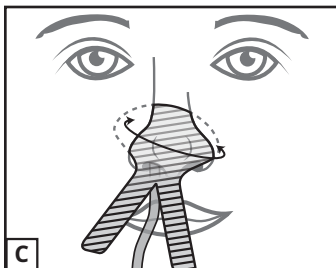


## Držac Nazogastrične Sonde

### Upute za Primjenu

1. Nakon što sondu postavite na mjesto, provjerite da su i nos i nazogastrična sonda čisti i suhi.
2. Očistite nos i područje oko njega čistim ubrusom navlaženim toplom vodom iz slavine (*bez sapuna*). Zatim čistim, suhim ručnikom obrišite to područje odmah nakon što ste ga očistili. (*Nemojte nanositi alkohol na mjesto na koje se postavlja sonda.*) Alkohol isušuje tkivo i može uzrokovati mikropukotine na koži. **(A)**
3. Također preporučamo da počistite vanjski dio nazogastrične sonde ispod nosnica kako biste uklonili moguće ostatke lubrikacijskog gela prije omotavanja krakova držača nazogastrične sonde.
4. Odljepite držač nazogastrične sonde od pozadine tako da dio koji se postavlja na nos povučete od vrha prema dolje. **(B)**
5. Postavite VRH (^) dijela koji ide na nos pod blagim kutom u odnosu na nosnicu, držeći nazogastričnu sondu na bolesnikovu nosu, na udaljenosti od otprilike 6 mm do 12 mm ispod vrha nosa. Na taj način sonda slobodno visi. **(C)**
6. Odaberite krak držača najbliži sondi i spiralno ga zamatajte oko sonde. Na početku pokušajte ostaviti manji otvor da oznaka cm na nazogastričnoj sondi ostane vidljiva. **(D)**
7. Zatim drugi krak zamatajte spiralno na isti način. **(E)**
8. Datum na koji je držač nazogastrične sonde postavljen možete označiti neotrovnom penkalom ili flomasterom.
9. Držač nazogastrične sonde promijenite nakon tri dana ili ranije prema potrebi.

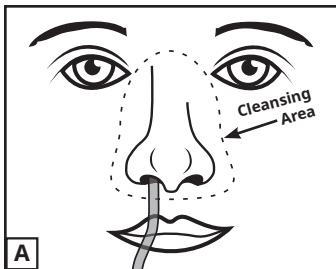

### Uklanjanje

Za uklanjanje držača nazogastrične sonde s bolesnika jednostavno povucite neljepljive vrhove svake trake kako biste ih odmotali od sonde.

Nastavite nježno povlačiti držač nazogastrične sonde prema gore kako biste ga uklonili s bolesnikova nosa.

Za uporabu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Video s uputama za primjenu nalazi se na [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Medicinski proizvodi Dale na raspolaganju su kod vašeg odabranog dobavljača bolničkog/medicinskog materijala.

Ne sadrži prirodni gumeni lateks.

Dale je registrirani zaštitni znak tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU i UK-u



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland