
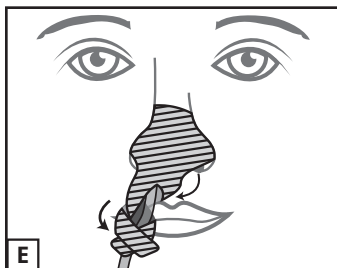
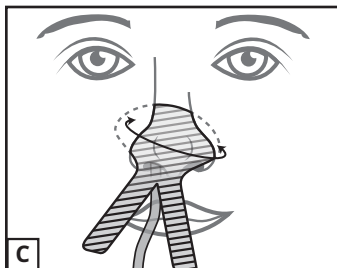


Nakładka Przytrzymująca do Zgłębnika Nosowo-żołądkowego

Instrukcja Zakładania

1. Po założeniu zgłębnika należy upewnić się, że nos i rurka są czyste i suche.
2. Wyczyścić nos i przyległy obszar czystą myjką zwilżoną ciepłą czystą wodą z kranu (*bez mydła*). Natychmiast po oczyszczeniu osuszyć obszar czystym suchym ręcznikiem. (*Nie nakładać na ten obszar alkoholu*). Alkohol wysuszy tkankę i może spowodować mikropęknięcia skóry.(A)
3. Zaleca się też, aby przed umieszczeniem nakładki przytrzymującej oczyścić zewnętrzną powierzchnię rurki nosowo-żołądkowej w obszarze pod nosem w celu usunięcia resztek żelu nawilżającego.
4. Rozpoczynając od górnej części nosowej, odkleić od podkładki nakładkę do przytrzymania rurki.
5. WIERZCHOŁEK (^) części nosowej nakładki umieścić pod niewielkim kątem w kierunku nozdrza, przytrzymując rurkę przy nosie pacjenta, około 6 mm do 12 mm poniżej czubka nosa. Umożliwi to swobodne zwisanie rurki.(C)
6. Następnie owinąć spiralnie odnogę znajdującą się bliżej rurki. Na początkowym odcinku owijania pozostawić małe okienko, aby na rurce widoczne było oznaczenie cm.(D)
7. Stosując tę samą spiralną technikę owinąć drugą odnogę.(E)
8. Na nakładce przytrzymującej rurkę nosowo-żołądkową można umieścić nietoksycznym markerem datę jej założenia.
9. Nakładkę należy wymienić po upływie 3 dni lub, jeśli zachodzi konieczność, wcześniej.

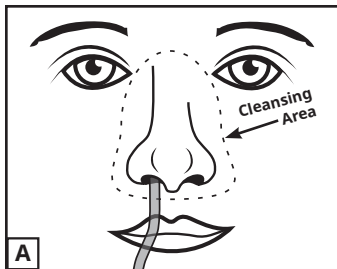

Usuwanie

Aby usunąć nakładkę przytrzymującą rurkę nosowo-żołądkową, należy pociągnąć za nieprzylepne końcówki każdej odnogi i odwinąć je z rurki.

Pociągać delikatnie nakładkę w kierunku do góry i zdjąć ją z nosa pacjenta.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku. Instrukcja użycia przetłumaczona na inne języki oraz wideo instruktażowe dostępne są na stronie www.dalemed.com.

Wyroby medyczne Dale można nabyć u swojego preferowanego dealera produktów szpitalnych/medycznych.

Nie zawiera lateksu naturalnego.

Dale jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dale Medical Products, Inc. w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland