
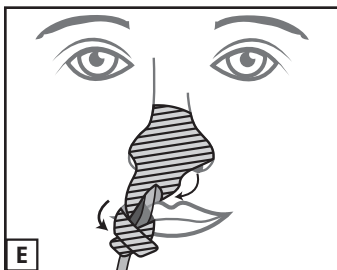
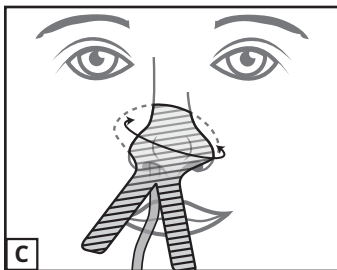
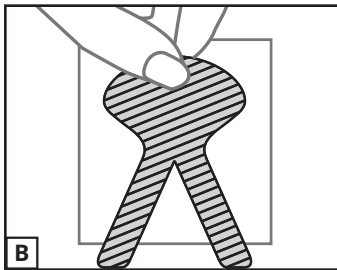


## Soporte para Sonda Nasogástrica

### Instrucciones de Aplicación

1. Una vez colocada la sonda nasogástrica (NG), verifique que la nariz y la sonda estén limpias y secas.
2. Limpie la nariz y el área circundante con un paño limpio humedecido con agua tibia y limpie del grifo (*sin jabón*). Seque el área de inmediato con una toalla limpia y seca. (*No use alcohol en esta área*). El alcohol seca el tejido y podría producir minúsculas grietas en la piel. **(A)**
3. También recomendamos limpiar el exterior de la sonda NG debajo de la nariz para eliminar cualquier gel de lubricación residual antes de colocar el soporte de sonda NG.
4. Despegue el forro del soporte de sonda NG comenzando en la parte superior de la sección para la nariz. **(B)**
5. Coloque el VÉRTICE (^) de la sección para la nariz ligeramente ladeado hacia la narina donde está la sonda, aproximadamente 6 a 12 mm por debajo de la punta de la nariz. Esto permite que la sonda cuelgue sin tensión. **(C)**
6. Comience a envolver la sonda NG en forma de espiral con la lengüeta más cercana a la sonda. Deje una pequeña abertura al inicio para que quede visible la marca de centímetros en la sonda. **(D)**
7. Use la misma técnica en espiral para enrollar la otra lengüeta. **(E)**
8. Puede escribir la fecha de colocación del soporte de sonda NG con un marcador de tinta no tóxica.
9. Cambie el soporte de sonda NG al cabo de 3 días o antes si fuera necesario.

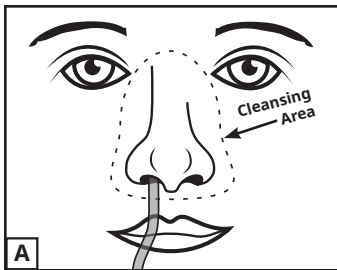

### Cómo Retirar

Para retirarle al paciente el soporte de la sonda NG, simplemente tire de los extremos no adhesivos de cada lengüeta para despegarlas de la sonda.

Siga tirando hacia arriba el soporte de la sonda para quitarlo de la nariz del paciente.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar la prenda, visite [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland