

## UltraGrip<sup>™</sup> Holder Til Ventrikelsonde

### Anbringelse

1. Når ventrikelsonden er anlagt: Sørg for, at både næsen og ventrikelsonden er ren og tør.
2. Rens næsen og området rundt om med en ren vaskeklud, der er fugtet med varmt, rent vand fra hanen (*ingen sæbe*). Tør området straks efter rensning med et rent, tørt håndklæde. (*Kom ikke sprit på det område, hvor sonden skal anbringes.*) Spirit udtørrer vævet og kan forårsage mikrovæv i huden. (A)
3. Træk papiret af holderens næsestykke.
4. Anbring, justér, og sæt næsestykket på den side af næsen, hvor sonden kommer ud. Sørg for, at sonden bliver i midten af næseboret og centreret på skumovergangsstykket. Ventrikelsondeholderen skal altid fugte med det næsebor, der bruges til ventrikelsonden. Den lange flig skal være parallel med sonden. (B)
5. Træk papiret af den lange flig, og vikl den rundt i en spiral, så sonden sidder midt i næseboret. (C)
6. Skift ventrikelsondeholderen efter 3 dage, eller oftere efter behov.

### Aftagning

Tag holderen af sonden ved at trække i spidsen uden klæbemiddel i enden af den lange flig.

Fortsæt med at trække sondeholderen forsigtigt opad for at tage den af patientens næse.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug




Der ligger en video, der viser anbringelse, på [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.

UltraGrip er et varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc.

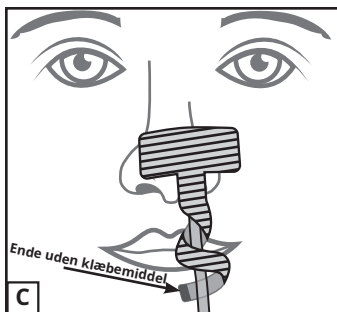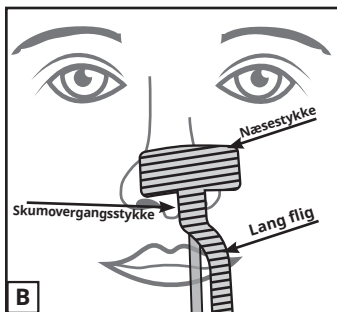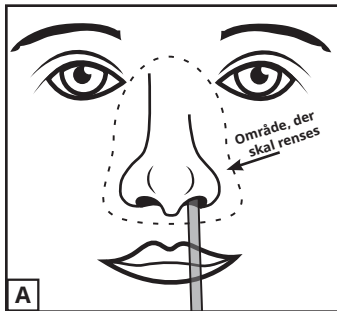

**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

