

UltraGrip[™]

Houder voor Nasogastrische Sonde

Instructies voor het Aanbrengen

1. Wanneer de sonde op zijn plaats zit, zorgt u dat de neus en de nasogastrische sonde beide schoon en droog zijn.
2. Reinig de neus en het gebied eromheen met een schoon washandje dat is bevochtigd met warm, schoon leidingwater (*geen zeep*). Onmiddellijk na reiniging droogt u het gebied met een schone, droge handdoek. (*Gebruik geen alcohol op deze plaats.*) Door alcohol droogt het weefsel uit en kunnen microscheurtjes in de huid ontstaan. **(A)**
3. Trek het draagvel los van het neuskussengedeelte van de houder.
4. Plaats het neuskussentje, richt het uit en breng het aan op de zijde van de neus waar de sonde naar buiten komt, terwijl u de sonde in het midden van de naris houdt en in het midden van het schuimbrugkussengedeelte uitricht. De houder voor de nasogastrische sonde moet altijd op één lijn liggen met de naris die door de nasogastrische sonde wordt gebruikt. De aparte lange tab moet evenwijdig zijn aan de sonde. **(B)**
5. Trek het draagvel van de aparte lange tab los en wikkel de tab spiraalsgewijs om de sonde, zodanig dat de sonde in de naris is gecentreerd. **(C)**
6. Verwissel de houder na 3 dagen of sneller indien nodig.

Verwijderen

Om de houder van de sonde te verwijderen, trekt u de niet-zelfklevende tip aan het uiteinde van de aparte lange tab gewoon naar achteren.

Wikkel de tab voorzichtig verder opwaarts van de houder af en haal de houder van de sonde en de neus van de patiënt af.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable




Een videofilmje over het aanbrengen van de houder vindt u op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische producten.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk.

UltraGrip is een handelsmerk van Dale Medical Products, Inc.

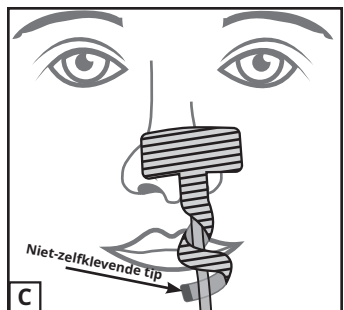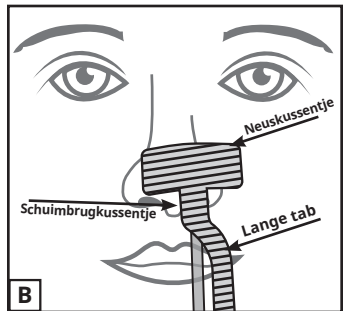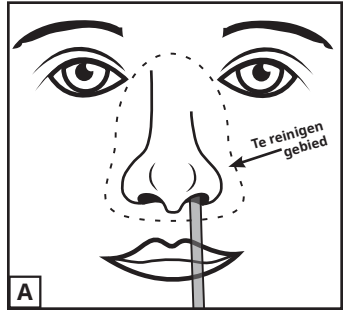

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland