

## UltraGrip<sup>™</sup> Nenä-mahaletkun Pidin

### Kiinnitysohjeet

1. Kun nenä-mahaletku on paikoillaan, varmista, että nenä ja letku ovat puhtaat ja kuivat.
2. Puhdista nenä ja sen ympärillä oleva alue puhtaalla pesulapulla, joka on kostutettu lämpimällä puhtaalla hanavedellä (*ei saippuaa*). Kuivaa alue välittömästi puhdistuksen jälkeen puhtaalla kuivalla pyyhkeellä. (*Älä levitä alkoholia kiinnitysalueelle.*) Alkoholi kuivattaa kudosta ja voi aiheuttaa ihon mikrohalkeilua.(A)
3. Vedä taustapaperi irti pitimen nenätyynyosasta.
4. Aseta, kohdista ja kiinnitä nenätyyny nenän sil le puolelle, josta letku tulee ulos, pitäen samalla letkua sieraimen keskellä ja kohdista letku vaahtomuovisen nenänselkätyynyn keskelle. Nenä-mahaletkun pidikkeen tulee aina olla kohdistettuna sen sieraimen kanssa, jossa nenä-mahaletkua käytetään. Yksittäisen pitkän kielekkeen tulee olla letkun suuntainen.(B)
5. Vedä taustapaperi irti yksittäisestä pitkästä kielekkeestä ja ala kääriä yksittäistä pitkää kielekettä kierteisesti niin, että letku on sieraimessa keskellä.(C)
6. Vaihda nenä-mahaletkun pidin 3 päivän jälkeen tai tarvittaessa aiemmin.

### Poistaminen

Kun haluat poistaa pitimen letkusta, vedä yksittäisen pitkän kielekkeen päässä olevasta kiinnittymättömästä päästä.

Vedä letkun pidintä varovasti ylöspäin ja irrota se letkusta ja potilaan nenästä.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.




Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

Dale on Dale Medical Products Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

UltraGrip on Dale Medical Products, Inc. -yhtiön tavaramerkki.

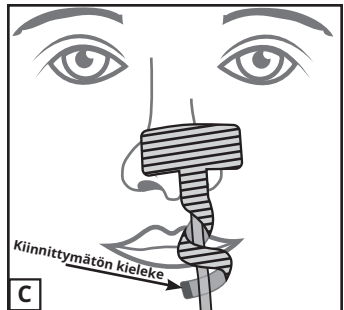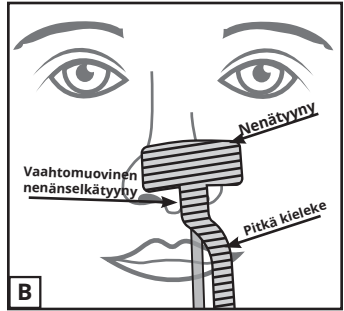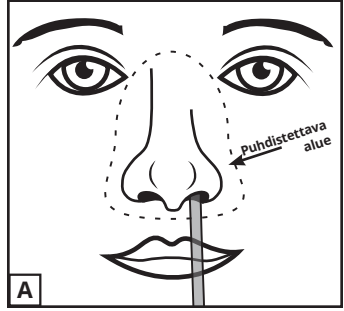

**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

