

UltraGrip[™]

Support de Sonde Naso-gastrique

Mode d'Emploi pour l'Application

1. Après avoir mis la sonde en place, assurez-vous que le nez et la sonde NG sont tous les deux propres et secs.
2. Nettoyez le nez et la zone qui l'entoure avec un gant de toilette propre humidifié avec de l'eau tiède propre du robinet (*sans savon*). Séchez la zone immédiatement après le nettoyage avec une serviette propre sèche. (*N'appliquez pas d'alcool sur cette zone d'application*) L'alcool dessèchera les tissus et pourrait provoquer des microfissures dans la peau. **(A)**
3. Détachez la doublure de la plaquette nasale du support.
4. Positionnez, alignez et appliquez la plaquette nasale sur le côté du nez d'où la sonde ressort tout en maintenant la sonde au centre de la narine et en alignant la sonde au centre de la plaquette en mousse de la voûte nasale. Le support de sonde NG doit toujours s'aligner sur la narine qui est utilisée par le support de sonde NG. La languette longue unique doit être parallèle à la sonde. **(B)**
5. Détachez la doublure de la languette longue unique et commencez à enrouler la languette longue unique en spirale de telle sorte que la sonde soit centrée dans la narine. **(C)**
6. Remplacez le support de sonde NG au bout de trois jours, ou plus tôt si nécessaire.

Retrait

Pour retirer le support de la sonde, tirez simplement sur la pointe non adhérente située à l'extrémité de la languette longue unique.

Continuez à tirer doucement le support de sonde vers le haut pour le retirer de la sonde et du nez du patient.

Pour utilisation sur un seul patient. Jetable




Pour regarder une vidéo montrant l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre revendeur de fournitures hospitalières/médicales préféré.

Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U., dans l'UE et au R.-U.

UltraGrip est une marque de commerce de Dale Medical Products, Inc.

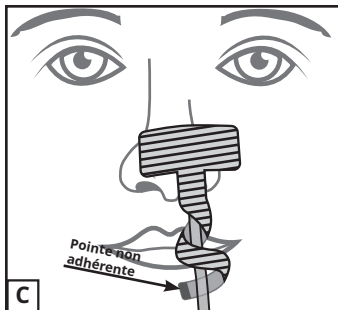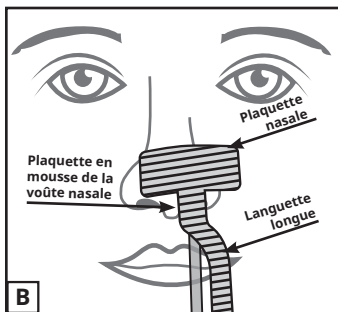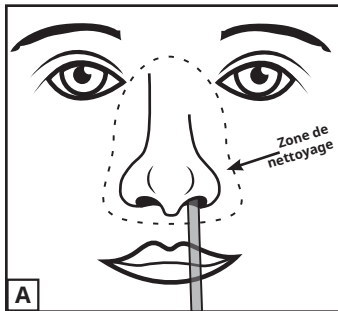

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland