

UltraGrip[™] Nasogastraler Sondenhalter

Anwendung

1. Nach Intubation der Sonde sicherstellen, dass die Nase des Patienten und die NG-Sonde sauber und trocken sind.
2. Die Nase und den umliegenden Bereich mit einem sauberen, mit warmem, sauberem Leitungswasser (*keine Seife*) angefeuchteten Waschlappen reinigen. Den Bereich unmittelbar nach der Reinigung mit einem sauberen, trockenem Tuch trocknen. (*Keinen Alkohol auf diesen Anwendungsbereich auftragen.*) Alkohol trocknet das Gewebe aus und kann Mikrorisse in der Haut verursachen. **(A)**
3. Die Schutzfolie vom Nasenpolsterteil des Halters abziehen.
4. Das Nasenpolster an der Seite der Nase, an der die Sonde austritt, positionieren, ausrichten und anbringen. Die Sonde dabei in der Mitte des Nasenlochs halten und in der Mitte des Schaumstoff-Brückenpolsters positionieren. Der NG-Sondenhalter sollte stets mit dem Nasenloch ausgerichtet sein, in das die NG-Sonde eingeführt ist. Die einzelne lange Lasche sollte parallel zur Sonde positioniert sein. **(B)**
5. Die Schutzfolie von der einzelnen langen Lasche abziehen und die einzelne lange Lasche so spiralförmig umwickeln, dass die Sonde im Nasenloch zentriert ist. **(C)**
6. Den NG-Sondenhalter nach drei Tagen (oder früher, falls erforderlich) wechseln.

Entfernen

Zum Entfernen des NG-Sondenhalters von der Sonde das nicht haftende Ende der einzelnen langen Lasche zurückziehen.

Den Sondenhalter weiter vorsichtig nach oben abwickeln, um ihn von der Sonde und der Nase des Patienten zu entfernen.

Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten.
Einwegprodukt




Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

UltraGrip ist eine Marke von Dale Medical Products, Inc.

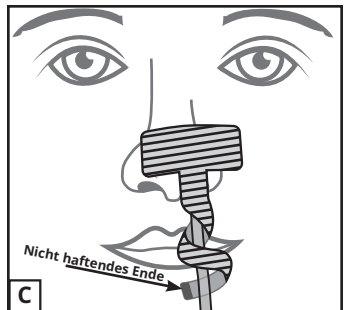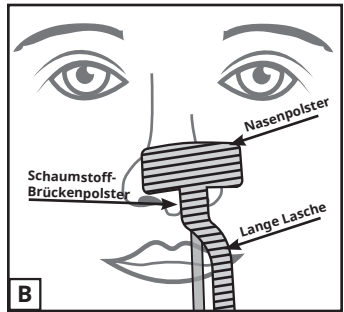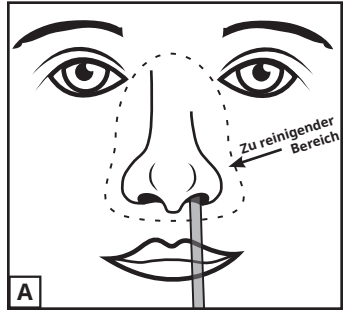

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland