

UltraGrip™ NasoGastric 튜브 홀더

부착 방법

1. 튜브가 제자리를 잡은 후, 코와 NG(NasoGastric) 튜브, 둘 모두 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하십시오.
2. 코와 그 주위를 따뜻하고 깨끗한 수도물로 축축히 묻힌 깨끗한 수건으로 깨끗하게 씻어 주십시오 (비누 사용 금지). 깨끗한 마른 수건으로 깨끗이 닦은 후 즉시 그 부위를 수건으로 닦아 말리십시오. (이 부착 부위에 알코올을 바르지 마십시오.) 알코올은 그 부위 조직을 말리고 피부의 미세 균열을 야기할 수 있습니다.(A)
3. 홀더의 코 패드 부분에서 라이너를 벗겨 내십시오.
4. 튜브를 콧구멍 중앙에 자리하게 두고 폼 브리지 패드 패드 부분의 중앙에 정렬시키면서 코 패드를 튜브가 실재하는 코의 측면에 위치시키고, 정렬하고, 부착하십시오. NG 튜브 홀더는 NG 튜브를 어느 쪽 콧구멍에 두든지 그 콧구멍과 항상 정렬해야 합니다. 싱글 룽 탭은 튜브와 평행하게 있어야 합니다.(B)
5. 싱글 룽 탭에서 라이너를 벗겨 내고 싱글 룽 탭을 나선형을 그리는 방식으로 감싸기 시작하여 튜브가 콧구멍 내 중앙에 자리하게 하십시오.(C)
6. 3일 후에, 또는 필요한 경우 더 빨리 홀더를 교체하십시오.

탈거

튜브에서 홀더를 탈거하려면, 싱글 룽 탭의 말단부의 비-부착 끝 부분을 그냥 잡아당겨 빼내십시오.

계속해서 살며시 홀더를 위로 잡아당겨 튜브와 환자 코에서 탈거하십시오.

단일 환자용. 1회용




부착 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

Dale 의료 제품은 선호하는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale은 미국, 유럽 연합 및 영국에 등록된 Dale Medical Products Inc.의 상표입니다.

UltraGrip은 Dale Medical Products, Inc.의 상표입니다.

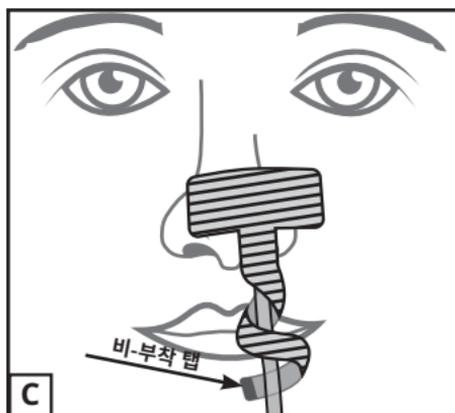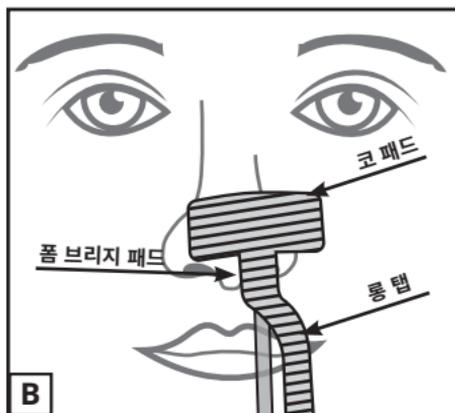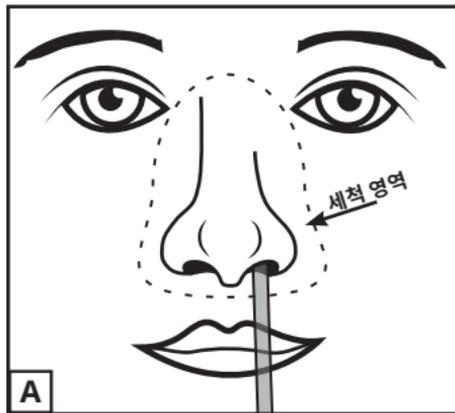

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

