

UltraGrip[™]

Nakładka Przytrzymująca do Zgłębnika Nosowo-żołądkowego

Instrukcja Zakładania

1. Po założeniu zgłębnika należy upewnić się, że nos i rurka są czyste i suche.
2. Wyczyścić nos i przyległy obszar czystą myjką zwilżoną ciepłą czystą wodą z kranu (*bez mydła*). Natychmiast po oczyszczeniu osuszyć obszar czystym suchym ręcznikiem. (*Nie nakładać na ten obszar alkoholu*). Alkohol wysuszy tkankę i może spowodować mikropęknięcia skóry. **(A)**
3. Odkleić podkładkę z części nosowej nakładki przytrzymującej.
4. Umieścić, odpowiednio ustawić i przykleić nakładkę nosową po stronie nozdrza, z którego przechodzi rurka, przytrzymując rurkę tak, aby przechodziła przez środek nozdrza i biegła wzdłuż linii środkowej gąbkowej nakładki mostkowej. Nakładkę przytrzymującą rurkę nosowo-żołądkową należy zawsze umieszczać po stronie nozdrza, przez które przechodzi rurka. Pojedyncza długa odnoga powinna być ustawiona równoległe do rurki. **(B)**
5. Odkleić podkładkę z pojedynczej dłuższej odnogi i rozpocząć spiralne owijanie odnogi wokół rurki, upewniając się, że rurka przechodzi przez środek nozdrza. **(C)**
6. Nakładkę należy wymienić po upływie 3 dni lub, jeśli zachodzi konieczność, wcześniej.

Usuwanie

W celu usunięcia nakładki przytrzymującej należy pociągać za nieprzyklepłą końcówkę pojedynczej dłuższej odnogi.

Delikatnym ruchem odwijać nakładkę w kierunku od dołu do góry w celu usunięcia jej z rurki i nosa pacjenta.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku




Wideo z instrukcją zakładania dostępne jest na stronie www.dalemed.com

Wyroby medyczne Dale można nabyć u swojego preferowanego dealera produktów szpitalnych/medycznych.

Nie zawiera lateksu naturalnego.

Dale jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dale Medical Products, Inc. w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii.

UltraGrip jest znakiem towarowym Dale Medical Products, Inc.

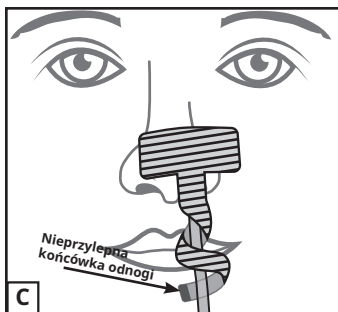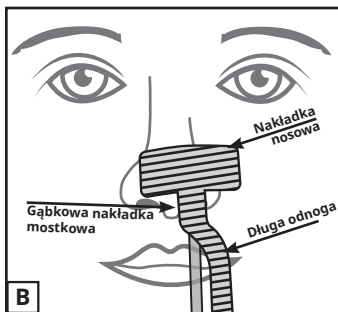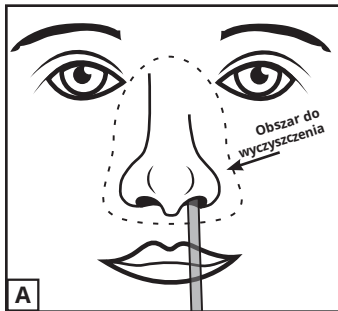

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland