

## UltraGrip<sup>™</sup>

### Suporte de Sonda Nasogástrica

#### Instruções de Aplicação

1. Depois de a sonda NG estar colocada, verifique se o nariz e a sonda NG estão limpos e secos.
2. Limpe o nariz e a área no entorno com um pano limpo humedecido com água limpa e cálida (*sem produto para limpeza*). Seque a área com uma toalha limpa e seca logo após a limpeza. (*Não aplique álcool a esta área de aplicação*). O álcool pode secar o tecido e causar microfissuras na pele. **(A)**
3. Remova o revestimento da peça do suporte onde se encontra a almofada do nariz.
4. Posicione, alinhe e aplique a almofada do nariz no lado de onde a sonda está a sair enquanto mantém a sonda no centro da narina, alinhando-a no centro da conexão revestida de espuma. O suporte de sonda NG deve estar sempre alinhado com a narina que está a ser utilizada pela sonda NG. A fita longa única deve ficar paralela à sonda. **(B)**
5. Remova o revestimento da fita longa única e comece a enrolá-la de modo espiral, de maneira que a sonda fique centrada no interior da narina. **(C)**
6. Troque o suporte de sonda NG depois de 3 dias ou antes, se necessário.

#### Remoção

Para retirar o suporte da sonda, basta puxar a ponta não adesiva na extremidade da fita longa única.

Continue a puxar o suporte de sonda com cuidado, num movimento para cima, para removê-lo do nariz do doente.

Para a utilização num único doente. Descartável.




Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, na UE e no Reino Unido.

UltraGrip é marca registada da Dale Medical Products, Inc.

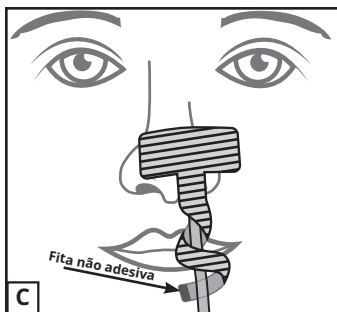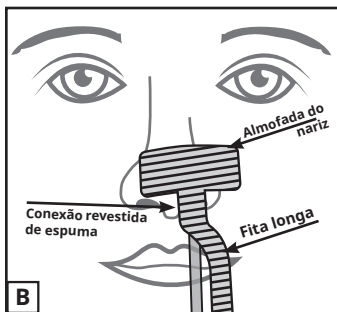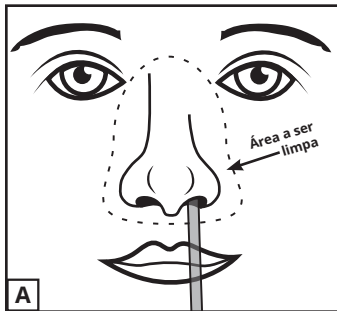

**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

