

UltraGrip[™]

Soporte para Sonda Nasogástrica

Instrucciones de Uso

1. Una vez colocada la sonda nasogástrica (NG), verifique que la nariz y la sonda estén limpias y secas.
2. Limpie la nariz y el área circundante con un paño limpio humedecido con agua tibia y limpie del grifo (*sin jabón*). Seque el área de inmediato con una toalla limpia y seca. (*No use alcohol en esta área*). El alcohol seca el tejido y podría producir minúsculas grietas en la piel. **(A)**
3. Despegue el forro de la almohadilla para la nariz.
4. Aplique la almohadilla para la nariz bien alineada en el lado de la nariz por donde sale la sonda manteniéndola centrada en la narina y alineándola con el centro de la almohadilla de espuma para el puente nasal. El soporte para sonda NG debe estar siempre alineado con la narina donde se encuentra la sonda NG. La tira larga debe quedar paralela a la sonda. **(B)**
5. Después de despegarle el forro, use la tira larga para envolver la sonda en forma de espiral, de forma que quede centrada dentro de la narina. **(C)**
6. Cambie el soporte de sonda NG al cabo de 3 días o antes si fuera necesario.

Cómo Retirar

Para retirar el soporte de la sonda NG, simplemente tire de la punta no adhesiva en el extremo de la tira larga.

Siga tirando hacia arriba el soporte de la sonda para quitarlo de la nariz del paciente.

Para uso en un solo paciente. Desechable




Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos médicos o para hospitales.

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU., la UE y el RU.

UltraGrip es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc.

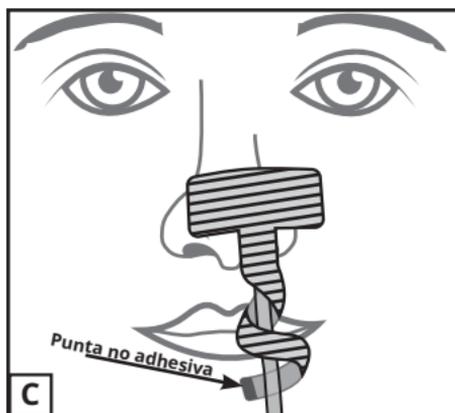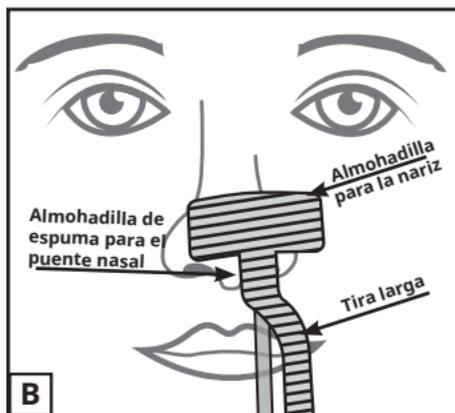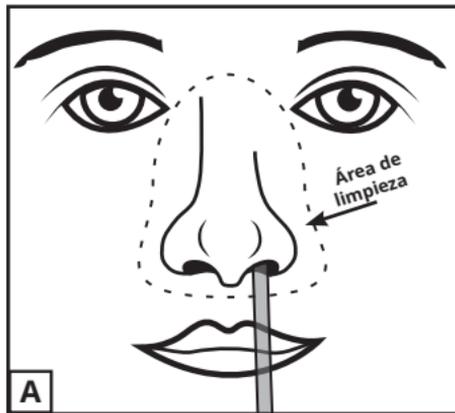

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

