

## UltraGrip<sup>™</sup>

### Hållare för Nasogastrisk Sond

#### Appliceringsanvisningar

1. När sonden väl är på plats, säkerställ att både näsan och den nasogastriska sonden är rena och torra.
2. Rengör näsan och området runt näsan med en ren tvättlapp fuktad med rent, varmt kranvatten (*ingen tvål*). Torka området torrt omedelbart efter rengöringen, med en ren och torr handduk. (*Alkohol får inte användas på detta appliceringsområde*). Alkohol torkar ut vävnaden och kan orsaka småsprickor i huden. (A)
3. Dra tillbaka skyddspapperet från hållarens näsdynadel.
4. Placera, rikta in och applicera näsdynan på den sida av näsan där sonden kommer ut medan du håller sonden i näsborrens mitt och riktar in sonden i mitten av näsryggsdynan av skumplast. Hållaren för nasogastrisk sond ska alltid vara inriktad mot den näsborre som den nasogastriska sonden sitter i. Den enstaka långa fliken ska vara parallell med sonden. (B)
5. Dra tillbaka skyddspapperet från den enstaka långa fliken och börja att linda den enstaka långa fliken i ett spiralformat mönster så att sonden är centrerad i näsborren. (C)
6. Byt ut hållaren efter tre dagar eller tidigare om nödvändigt.

#### Borttagning

För att ta av hållaren från sonden, dra helt enkelt i den icke självhäftande änden på den enstaka långa fliken.

Fortsätt att försiktigt dra loss hållaren i en uppåtgående rörelse för att linda av och ta bort den från sonden och patientens näsa.




För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt  
För att se en appliceringsvideo, gå till [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilätex.

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.

UltraGrip är ett varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc.

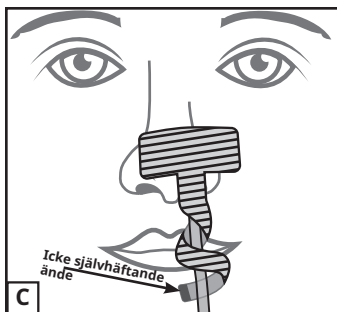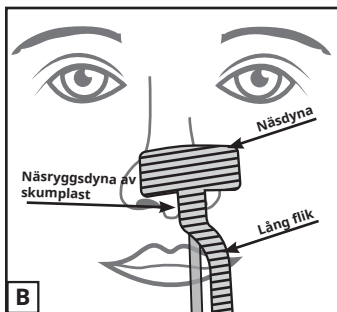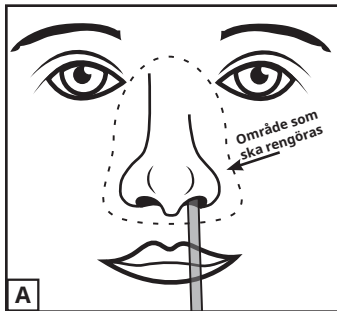

**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

