

## UltraGrip™ เทปติดสายอาหารทางจมูก (NG)

### คำแนะนำการใช้

1. หลังจากใส่สายอาหารเข้าที่ติแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจมูกผู้ป่วยและสาย NG สะอาดและแห้งดี
2. เช็ดทำความสะอาดจมูกผู้ป่วยและผิวหนังบริเวณรอบ ๆ ด้วยผ้าขนหนูสะอาดชุบน้ำสะอาดและอุ่น (ไม่ต้องใช้สบู่) หลังจากนั้นใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดบริเวณดังกล่าวทันทีให้แห้ง (อย่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่จะติดเทป) แอลกอฮอล์จะทำให้เนื้อเยื่อแห้งและอาจทำให้เกิดรอยแตกเล็ก ๆ ที่ผิวหนังบริเวณนั้นได้ (A)
3. ลอกแผ่นรองออกจากส่วนแผ่นติดจมูกของเทป
4. จัดแผ่นติดจมูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนจมูก ด้านที่ใส่สายอาหาร และติดแผ่นนั้นบนจมูก ขณะเดียวกันก็จับสายอาหารให้อยู่ตรงกลางของแผ่นโฟมตรงกลางของเทป เทปติดสายอาหารควรอยู่ในแนวเดียวกันกับรูจมูกด้านที่ใส่สายอาหาร แล้วยาวเส้นเดียวควรขนานกับสายอาหาร (B)
5. ลอกแผ่นรองออกจากแถบยาวเส้นเดียว และเริ่มพันแถบยาวนั้นเป็นเกลียวในแนวลงเพื่อติดกับสายอาหาร โดยให้สายอาหารอยู่ตรงกลางข้างในรูจมูก (C)
6. เปลี่ยนเทปติดสาย NG หลังจากนั้น 3 วันหรือเร็วกว่านั้น หากจำเป็น

### การเอาเทปออก

หากต้องการเอาเทปออกจากสายอาหาร เพียงดึงส่วนปลายที่ไม่มีกาวของแถบยาวเส้นเดียวออก

ค่อย ๆ คลายเทปออกในแนวขึ้นเพื่อลอกเทปออกจากสายอาหารและจมูกผู้ป่วย

สำหรับใช้ครั้งเดียวกับผู้ป่วย ใช้แล้วทิ้งเลย




หากต้องการดูวิธีใช้ โปรดไปที่ [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาลหรือตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่คุณต้องการ

ไม่ได้ทำจากนํ้ายางสังเคราะห์

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

UltraGrip เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dale Medical Products, Inc.

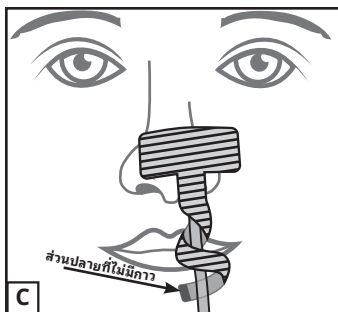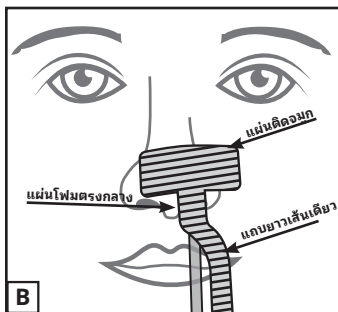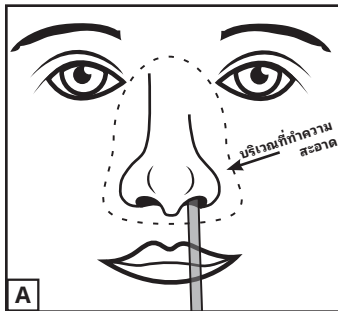

Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
โทรศัพท์: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

