

UltraGrip[™]

Nazogastrik Sonda Sabitleme Bandı Uygulama Talimatları

1. Nazogastrik (NG) sondayı yerleştirdikten sonra burnun ve NG sondanın hem temiz hem de kuru olduğundan emin olun.
2. Burnu ve etrafındaki bölgeyi ılık, temiz musluk suyuyla nemlendirilmiş temiz bir bezle temizleyin (*sabun kullanmayın*). Temizledikten hemen sonra bölgeyi temiz ve kuru bir havluyla kurulaştırın. (*Bu uygulama bölgesine alkol uygulamayın*) Alkol dokuyu kurutur ve deride mikro çatlaklara neden olabilir. **(A)**
3. Sabitleyicinin Burun Padi kısmındaki astarı ayırın.
4. Sondayı burun deliğinin ortasında tutup Köpük Köprü Padi kısmının ortasına hizalarken Burun Pedini sondanın çıktığı burun tarafına yerleştirin, hizalayın ve uygulayın. NG Sonda Sabitleme Bandı her zaman NG Sonda hangi burun deliği tarafındaysa onunla hizalanmalıdır. Tekli Uzun Şerit sondaya paralel olmalıdır. **(B)**
5. Tekli Uzun Şerit astarını ayırın ve sondayı burun deliği içinde ortalayacak şekilde Tekli Uzun Şeridi spiral bir şekilde sarmaya başlayın. **(C)**
6. NG Sonda Sabitleme Bandını 3 gün sonra veya gerekirse daha erken değiştirin.

Çıkarma

Sabitleme Bandını sondadan çıkarmak için Tekli Uzun Şeridin sonundaki Yapışkan Olmayan Ucu geri çekmeniz yeterlidir.

Sonda sabitleme bandını hastanın burnundan çıkarmak için yukarı doğru hafifçe çekmeye devam edin.

Tek hastada kullanım içindir. Tek kullanımlıdır.




Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com adresini ziyaret edin.

Dale tıbbi ürünlerin, tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden bulabilirsiniz.

Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.

Dale, ABD, AB ve BK'de Dale Medical Products, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır

UltraGrip, Dale Medical Products, Inc.'in bir ticari markasıdır.

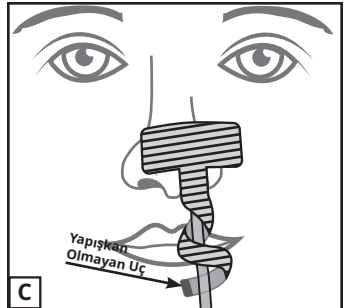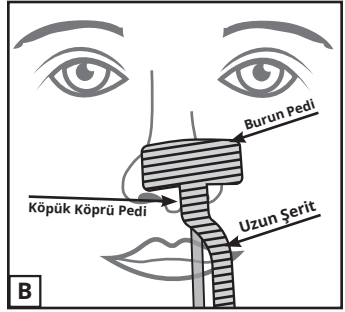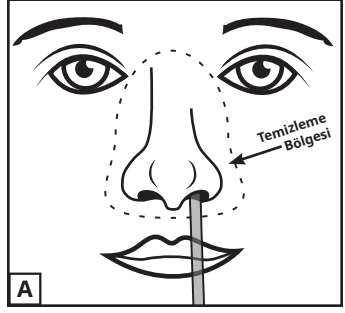

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

