


## Scrape-n-Suction<sup>™</sup> Čistač Jezika

### Opis Proizvoda

Uklanja bakterije i toksine u biofilmu jezika.

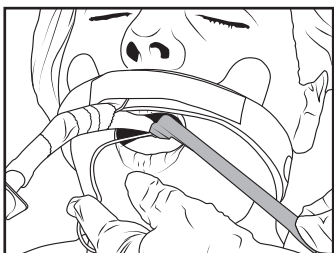

### Upute za Primjenu

**Za najbolje rezultate upotrijebiti neposredno nakon redovne higijene usne šupljine.**

1. Pričvrstite kraj s resicama strugača-sisaljke na cjevčicu sisaljke.
2. Postavite intenzitet sisanja na **preporučenu razinu od 100 mmHg**. Povećavajte intenzitet sisanja prema potrebi za uklanjanje debljeg sloja biofilma ili naslaga biofilma. **Intenzitet sisanja ne smije prelaziti 150 mmHg.**
3. Nježno postavite glavu strugača-sisaljke na stražnji dio jezika.
4. Primjenom laganog pritiska postupno povlačite strugač-sisaljku prema vrhu jezika, uklanjajući biofilm.
5. Ponovite korake 3 i 4 dok ne očistite sve dijelove jezika.
6. Strugač-sisaljku uklonite nakon upotrebe.

Za primjenu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Video s uputama za primjenu nalazi se na [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Medicinski proizvodi Dale na raspolaganju su kod vašeg odabranog dobavljača bolničkog/medicinskog materijala.

Ne sadrži prirodni gumeni lateks.

Patent [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale je registrirani žig tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU-u i UK-u.

Scrape-n-Suction je registrirani žig tvrtke Dale Medical Products, Inc.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

