


Scrape-n-Suction[™] Tungerenser

Beskrivelse af Produktet

Fjerner bakterier og toksiner i tungens biofilm.

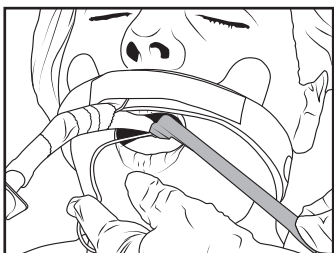

Brugsanvisning

De bedste resultater opnås ved brug umiddelbart efter almindelig mundhygiejne.

1. Sæt den ende af skraberens, der har modhager, på sugeslangen.
2. Indstil suget til det **anbefalede tryk på 100 mmHg**. Øg sugetrykket efter behov for at fjerne tyk eller fastsiddende biofilm. **Sugetrykket må ikke overstige 150 mmHg.**
3. Anbring forsigtigt skraberens hoved på den bageste del af tungen.
4. Pres let ned, og træk gradvist skraberens frem mod tungespidsen, hvorved biofilmen fjernes.
5. Gentag trin 3 og 4, indtil alle områder på tungen er rensede.
6. Kassér skraberens efter brug.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug

Der ligger en video, der viser anbringelse, på www.dalemed.com.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.

Scrape-n-Suction er et varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

