


Scrape-n-Suction[™] Tongreiniger

Product Beschrijving

Verwijdert bacteriën en gifstoffen in de biofilm van de tong.

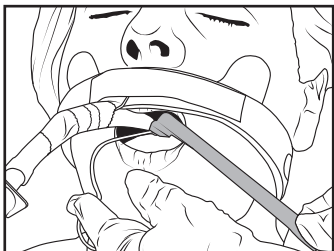

Instructies voor het Aanbrengen

Onmiddellijk na de standaard mondverzorging gebruiken voor het beste resultaat.

1. Bevestig het schraperuiteinde van de reiniger aan de zuigslang.
2. Stel de zuigkracht in op de **aanbevolen 100 mmHg**. Verhoog de zuigkracht indien nodig om dikke of aangekoekte biofilm te verwijderen. **De 150 mmHg niet overschrijden.**
3. Plaats de kop van de reiniger voorzichtig bij de achterkant van de tong.
4. Trek de reiniger geleidelijk onder lichte druk richting tongpunt en verwijder zo de biofilm.
5. Herhaal stap 3 en 4 totdat het gehele oppervlak van de tong is gereinigd.
6. Voer de reiniger af na gebruik.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable

Een videofilmje over het aanbrengen van de houder vindt u op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische producten.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Octrooi www.dalemed.com/patents

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Scrape-n-Suction is een handelsmerk van Dale Medical Products, Inc.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

