


Scrape-n-Suction™ Kielenpuhdistin

Tuotteen Kuvaus

Poistaa kielen biofilmissä olevat bakteerit ja toksiinit.

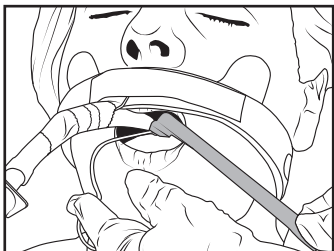

Kiinnitysohjeet

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä heti tavanomaisen suunhoidon jälkeen.

1. Kiinnitä puhdistimen väkäsellinen pää imuletkuun.
2. Aseta imu suositellulle 100 mmHg:n tasolle. Lisää imutehoa tarpeen mukaan paksun tai pinttyneen biofilmin poistamiseksi. Älä ylitä 150 mmHg:n painetta.
3. Aseta puhdistimen pää varovasti lähelle kielen takaosaa.
4. Poista biofilmi vetämällä puhdistinta vähitellen ja samalla kevyesti painaen kohti kielen kärkeä.
5. Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes kaikki kielen alueet on puhdistettu.
6. Hävitä puhdistin käytön jälkeen.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

Patentti www.dalemed.com/patents

Dale on Dale Medical Products Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Scrape-n-Suction on Dale Medical Products, Inc. -yhtiön tavaramerkki.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

