


## Scrape-n-Suction<sup>™</sup> Nettoyeur de Langue

### Description du Produit

Élimine les bactéries et les toxines présentes dans le biofilm de la langue.

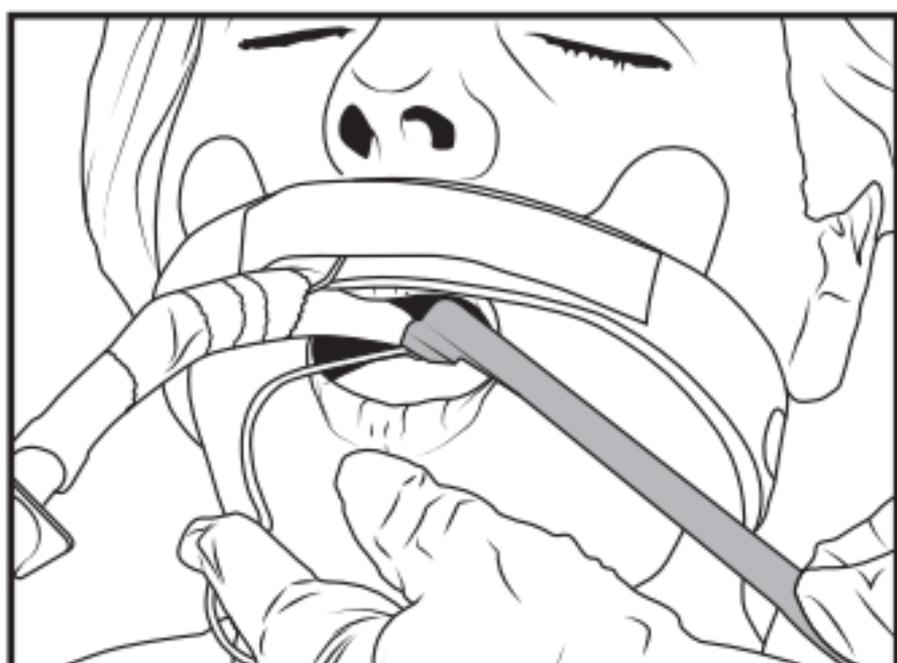

### Instructions pour l'Application

**Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez immédiatement après avoir effectué des soins d'hygiène buccale standard.**

1. Attachez l'extrémité barbelée du gratte-langue au tube d'aspiration.
2. Réglez la puissance d'aspiration au niveau **recommandé de 100 mmHg**. Augmentez le niveau d'aspiration suivant les besoins pour détacher le biofilm épais ou incrusté. **Ne dépassez pas 150 mmHg.**
3. Placez doucement la partie avant du gratte-langue près de l'arrière de la langue.
4. Tout en appliquant une légère pression, tirez progressivement le gratte-langue vers la pointe de la langue en détachant le biofilm.
5. Recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que toutes les parties de la langue aient été nettoyées.
6. Jetez le gratte-langue après l'avoir utilisé.

Pour utilisation sur un seul patient. Jetable

Pour regarder une vidéo montrant l'application, veuillez vous rendre sur le site [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre revendeur de fournitures hospitalières/médicales préféré.

Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Brevet [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U., dans l'UE et au R.-U.

Scrape-n-Suction est une marque de commerce de Dale Medical Products, Inc.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

