


Scrape-n-Suction™ Zungenreiniger

Beschreibung des Produkts

Entfernt Bakterien und Toxine im Biofilm der Zunge.

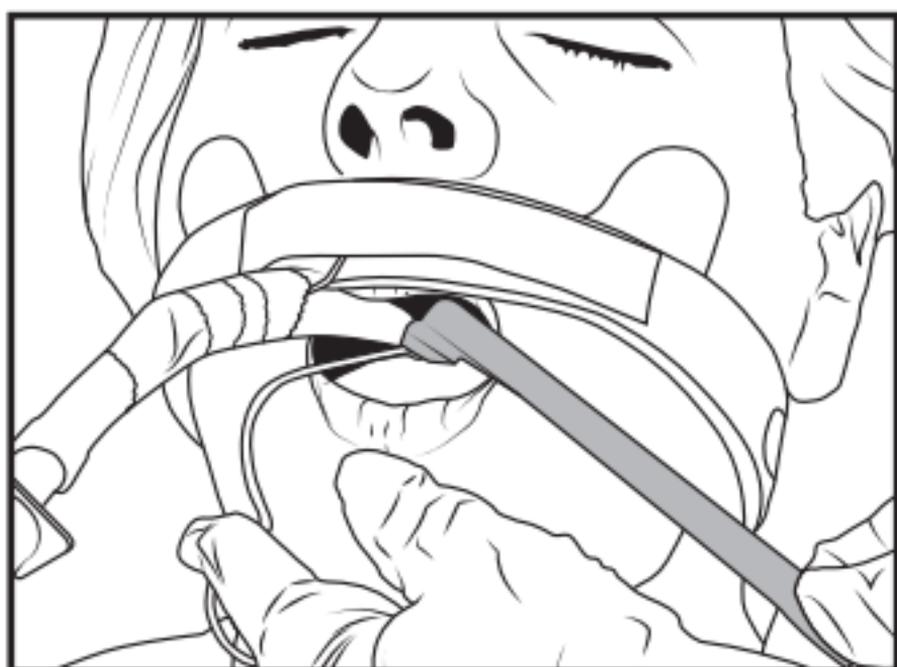

Anwendungshinweise

Für beste Ergebnisse sofort nach der normalen Mundpflege anwenden.

1. Das mit Widerhaken versehene Ende des Reinigers mit dem Saugschlauch verbinden.
2. Die Saugleistung auf den empfohlenen Wert von 100 mmHg einstellen. Die Saugleistung nach Bedarf erhöhen, um dicken oder verkrusteten Biofilm zu entfernen. Dabei 150 mmHg nicht überschreiten.
3. Den Kopf des Reinigers sanft in der Nähe der Zungenwurzel positionieren.
4. Den Reiniger mit leichtem Druck allmählich zur Zungenspitze ziehen, um den Biofilm zu entfernen.
5. Die Schritte 3 und 4 wiederholen, bis alle Bereiche der Zunge gereinigt sind.
6. Den Reiniger nach Gebrauch entsorgen.

Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten.
Einwegprodukt

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.


Patent www.dalemed.com/patents

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

Scrape-n-Suction ist eine Marke von Dale Medical Products, Inc.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

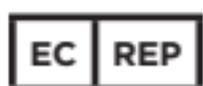

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland