


## Scrape-n-Suction™ 舌クリーナー

### 商品説明

舌のバイオフィームに含まれる細菌や毒素を除去。

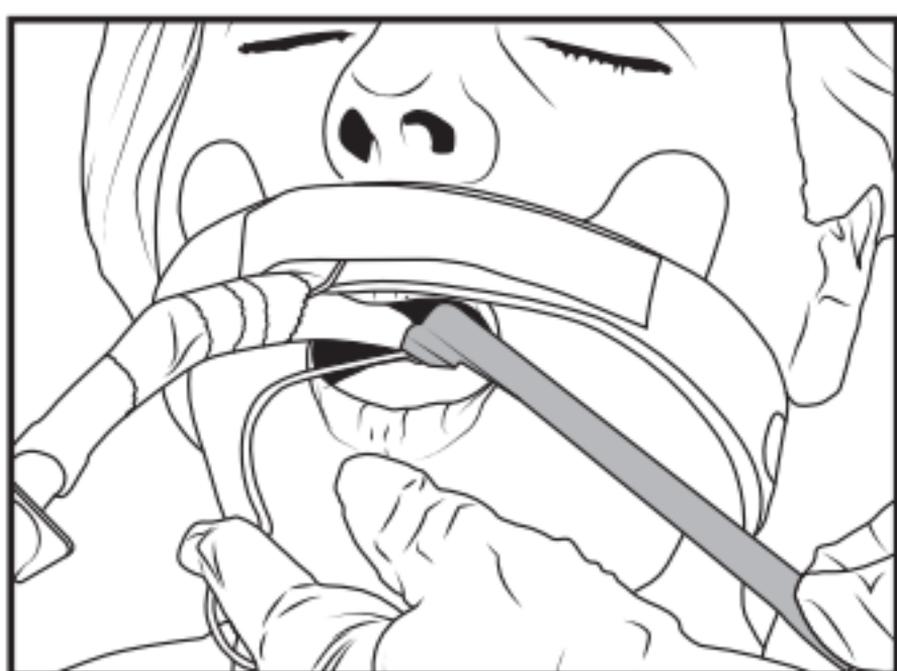

### 使用方法

通常の口腔ケア後、直ぐに使用すると最も効果が得られます。

1. クリーナーの端にあるぎざぎざ部に吸引チューブを取り付けます。
2. 推奨するレベル100 mmHgに吸引を設定します。吸引レベルを必要に応じて上げて、厚い又は塊のバイオフィームを取り除きます。150 mmHgを超えないこと。
3. 舌の奥近くにクリーナーヘッドをやさしく置きます。
4. 軽く圧を加えながら、ゆっくりとクリーナーを舌の先まで移動させ、バイオフィームを取り除きます。
5. 舌全体がきれいになるまでステップ3と4を繰り返します。
6. 使用後のクリーナーは捨ててください。

一人の患者のみに使用。使い捨て用

取り扱い説明ビデオは、[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)でご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

特許 [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Daleは米国、欧州連合、英国のDale Medical Products, Inc.の登録商標です。

Scrape-n-Suctionは、Dale Medical Products, Inc.の商標です。



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland