


## Scrape-n-Suction™

### 혀 클리너

#### 제품 설명

혀의 바이오필름에 있는 박테리아와 독소를 제거합니다.

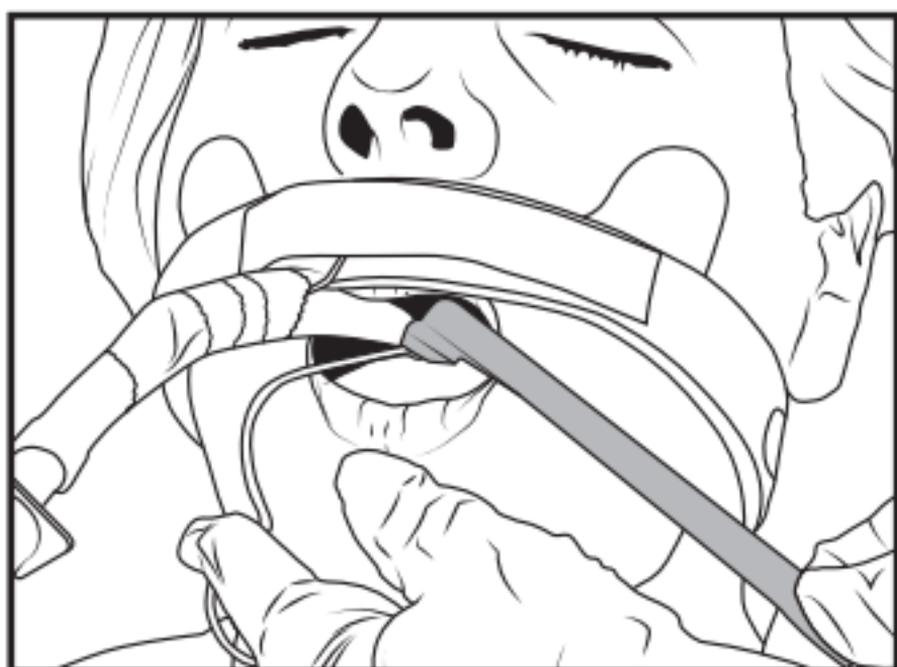

#### 사용법

최상의 결과를 위해, 일반적인 구강 관리 후 즉시 사용하십시오.

1. 클리너의 갈고리 모양 끝부분을 흡입 튜브에 연결하십시오.
2. 흡입 수준을 권장 수준인 100mmHg로 설정하십시오. 두껍거나 말라붙은 바이오필름을 제거하기 위해 필요한 경우 흡입 수준을 높이십시오. 150mmHg를 초과하지 마십시오.
3. 클리너 헤드를 혀의 뒤쪽 가까이에 살며시 두십시오.
4. 점차적으로, 가벼운 압력을 가하면서, 클리너를 혀 끝 방향으로 끌어당겨, 바이오필름을 제거하십시오.
5. 혀의 모든 부위가 깨끗해질 때까지 3단계와 4단계를 반복하십시오.
6. 사용 후 클리너를 버리십시오.

단일 환자용. 1회용

부착 시연 영상을 보시려면, [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)을 방문하십시오.

Dale 의료 제품은 선호하는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

특허 [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale은 미국, 유럽 연합 및 영국에 등록된 Dale Medical Products Inc.의 상표입니다.

Scrape-n-Suction은 Dale Medical Products, Inc.의 상표입니다.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, 미국  
전화: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

