


Scrape-n-Suction™ Tungerenser

Beskrivelse av Produktet

Fjerner bakterier og giftstoffer i tungens biofilm.

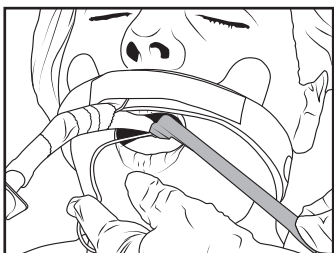

Bruksanvisning

Best resultat oppnås ved å bruke produktet umiddelbart etter standard munnpleie.

1. Fest mothakeenden av tungerenseren til sugeslangen.
2. Still sugeeffekten på det **anbefalte nivået, 100 mmHg**. Øk sugeeffekten etter behov for å fjerne tykk eller hard biofilm. **Overstig ikke 150 mmHg.**
3. Plasser renehodet forsiktig nær den bakre delen av tungen.
4. Bruk lett trykk, og dra tungerenseren gradvis mot tungespissen slik at biofilmen fjernes.
5. Gjenta trinn 3 og 4 til alle områder av tungen er rensset.
6. Kast tungerenseren etter bruk.

Til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Ikke produsert med naturgummilateks.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

Scrape-n-Suction er et varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

