


Scrape-n-Suction[™] Czyścik do Języka

Opis Produktu

Usuwa bakterie i toksyny z biofilmu języka.

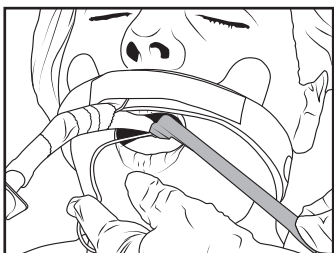

Instrukcja Użycia

Aby zapewnić optymalne rezultaty, użyj bezpośrednio po standardowym czyszczeniu jamy ustnej.

1. Zamocuj końcówkę z zadziorami czyścika do przewodu ssącego.
2. Ustaw ssanie na **zalecany poziom 100 mmHg**. W celu usunięcia grubej lub zeskorupiałej warstwy biofilmu bakteryjnego zwiększ odpowiednio poziom ssania. **Poziom ten nie powinien przekraczać 150 mmHg.**
3. Delikatnie umieść głowicę czyścika w okolicy tylnej części języka.
4. Stopniowo, wywierając lekki nacisk, przesuwaj czyścik w kierunku końca języka, usuwając biofilm.
5. Powtarzaj kroki 3 i 4 do chwili, gdy cała powierzchnia języka zostanie wyczyszczona.
6. Po użyciu czyścik wyrzucić.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku

Wideo z instrukcją zakładania dostępne jest na stronie www.dalemed.com

Wyroby medyczne Dale można nabyć u swojego preferowanego dealera produktów szpitalnych/medycznych.

Nie zawiera lateksu naturalnego.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dale Medical Products, Inc. w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii.

UltraGrip jest znakiem towarowym Dale Medical Products, Inc.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

