


## Scrape-n-Suction<sup>™</sup> Limpador de Língua

### Descrição do Produto

Elimina as bactérias e as toxinas do biofilme da língua.

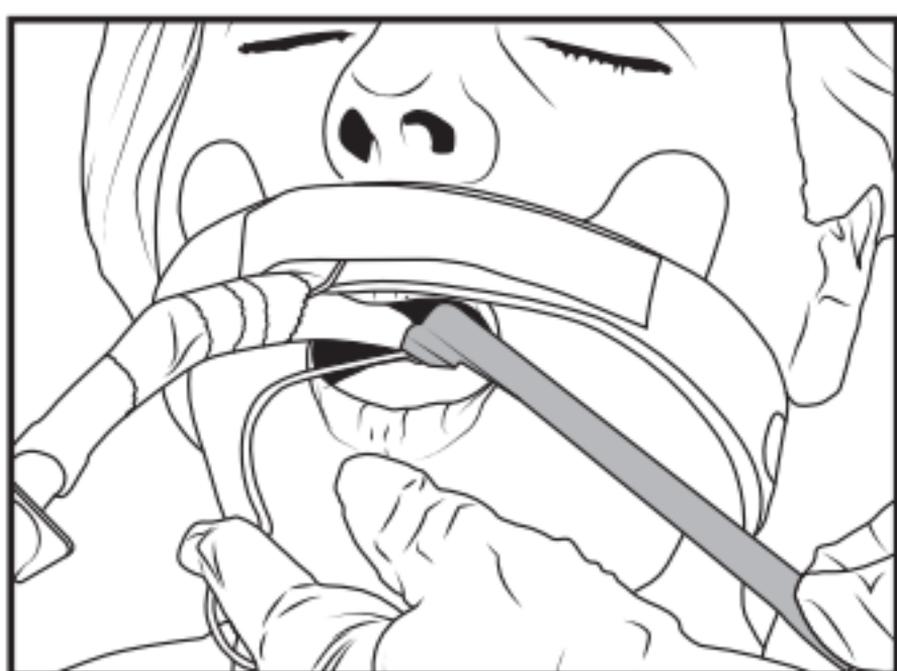

### Instruções de Aplicação

**Para obter os melhores resultados, utilize imediatamente após os cuidados bucais padrão.**

1. Prenda a extremidade espigada do Limpador ao tubo de sucção.
2. Ajuste a sucção para o **nível recomendado de 100 mmHg**. Aumente o nível de sucção conforme necessário para a remoção de biofilme espesso ou firmemente aderido. **Não ultrapasse 150 mmHg.**
3. Com Cuidado, posicione o cabeçote do Limpador perto da parte de trás da língua.
4. Gradualmente, aplicando leve pressão, puxe o Limpador na direção da ponta da língua, removendo o biofilme.
5. Repita as etapas 3 e 4 até que todas as áreas da língua estejam limpas.
6. Depois da utilização, descarte o Limpador.

Para a utilização num único doente. Descartável.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Patente [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, na UE e no Reino Unido.

Scrape-n-Suction é marca registada da Dale Medical Products, Inc.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

