


Scrape-n-Suction[™] Limpiador de Lengua

Descripción del Producto

Elimina las bacterias y toxinas del biofilm de la lengua.

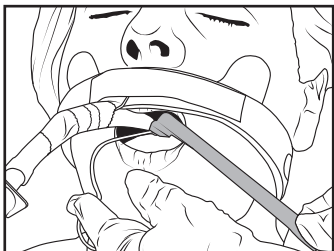

Instrucciones de Aplicación

Para obtener los mejores resultados, úsese inmediatamente después del cuidado bucal habitual.

1. Conecte el extremo áspero del limpiador al tubo de succión.
2. Fije la succión al **nivel recomendado de 100 mmHg**. Aumente la succión en la medida necesaria para eliminar la biopelícula gruesa e incrustada. **No exceda los 150 mmHg**.
3. Coloque suavemente la cabeza del limpiador en la parte posterior de la lengua.
4. Aplicando una ligera presión, tire gradualmente del limpiador hacia la punta de la lengua para eliminar la biopelícula.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que todas las áreas de la lengua se hayan limpiado.
6. Deseche el limpiador después de usarlo.

Para uso en un solo paciente. Desechable

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos médicos o para hospitales.

Fabricado sin látex de goma natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU., la UE y el RU.

Scrape-n-Suction es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland