


Scrape-n-Suction[™] Tungrengörare

Produktbeskrivning

Avlägsnar bakterier och toxiner i tungans biofilm.

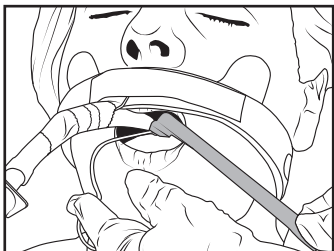

Appliceringsanvisningar

För bästa resultat, använd skrapan omedelbart efter sedvanlig munvård.

1. Anslut skrapans hullingförsedda ände till sugslangen.
2. Ställ in sugningen på den **rekommenderade nivån, 100 mmHg**. Öka sugnivån efter behov för att avlägsna tjock eller intorkad beläggning. **Överskrid inte 150 mmHg**.
3. Placera försiktigt skrapans huvud nära tungans bakre del.
4. Tryck lätt och dra samtidigt skrapan successivt mot tungspetsen så att beläggningen avlägsnas.
5. Upprepa steg 3 och 4 tills alla områden på tungan är rengjorda.
6. Kasta skrapan efter användning.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.

Scrape-n-Suction är ett varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland