


# Dale®

Medical Products

## Scrape-n-Suction™ นํายาทำความสะอาดลิ้น

### คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ขจัดแบคทีเรียและสารพิษในไบโอฟิล์มของลิ้น

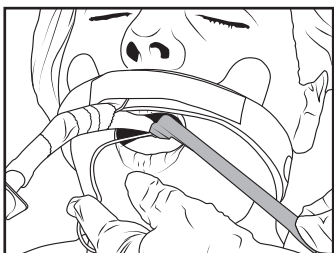

### คำแนะนำในการใช้

ควรใช้ทันทีหลังจากการดูแลช่องปากแบบมาตรฐาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1. ต่อส่วนปลายของอุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้นด้านที่มีลักษณะเหมือนเงี่ยงเข้ากับสายดูดเสมหะ
2. ตั้งแรงดูดเสมหะตามระดับที่แนะนำคือ **100 mmHg** เพิ่มระดับแรงดูดเสมหะตามความจำเป็น เพื่อขจัดไบโอฟิล์มที่เป็นคราบหนาหรือสะเก็ด แต่อย่าให้เกิน **150 mmHg**
3. ค่อย ๆ วางส่วนหัวของอุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้นใกล้กับโคนลิ้น
4. ค่อย ๆ ลากขูดอุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้นไปสู่ปลายลิ้นเพื่อขจัดไบโอฟิล์มโดยใช้แรงขูดเบา ๆ
5. ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำ ๆ จนกระทั่งลิ้นสะอาดทั่ว
6. ทิ้งอุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้นหลังจากใช้เสร็จ

สำหรับใช้ครั้งเดียวกับผู้ป่วย ใช้แล้วทิ้งเลย

หากต้องการดูวิธีใช้ โปรดไปที่ [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

ผลิตภัณฑ์การแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาลหรือตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่คุณต้องการ

ไม่ได้ทำจากนํายางชั้นธรรมชาติ

ทริบิวต์ [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

UltraGrip เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dale Medical Products, Inc.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
โทรศัพท์: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland