


## Scrape-n-Suction™ Dil Temizleyici

### Ürün Açıklaması

Dilin biyofilmindeki bakteri ve toksinleri temizler.

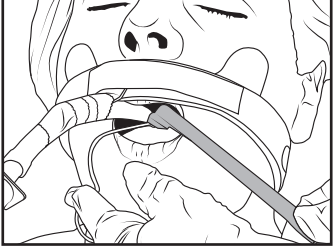

### Uygulama Talimatları

**En iyi sonuç için standart ağız bakımından hemen sonra kullanın.**

1. Temizleyicinin vidalı ucunu emme borusuna takın.
2. Emme seviyesini **önerilen 100 mmHg seviyesine** ayarlayın. Kalın veya kabuklanmış biyofilmi çıkarmak için emme seviyesini gerektiği kadar artırın. **150 mmHg'yi aşmayın.**
3. Temizleyicinin baş kısmını nazikçe dilin arkasına yakın bir yere yerleştirin.
4. Yavaş yavaş, hafif basınç uygularken, Temizleyiciyi dilin ucuna doğru çekerek biyofilmi çıkarın.
5. Dilin tüm alanları temizlenene kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Kullandıktan sonra Temizleyiciyi atın.

Tek hastada kullanım içindir. Tek kullanımlıktır.

Uygulama videosu için lütfen [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) adresini ziyaret edin.

Dale tıbbi ürünlerin, tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden bulabilirsiniz.

Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.

Patent [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale, ABD, AB ve BK'de Dale Medical Products, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır

Scrape-n-Suction, Dale Medical Products, Inc.'in bir ticari markasıdır.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

