


Držači Traheostomske Kanile

Upute za Primjenu

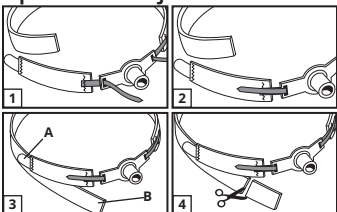

1. Provucite duge i uske trake za pričvršćivanje kroz otvore na svakoj trahealnoj pločici.
2. Trake povucite natrag preko otvora i zalijepite na ovratnik.
3. Pričvrstite trake za pričvršćivanje kraćeg dijela (A) na dugi dio ovratnika (B). Prilagodite dužinu ili potreban pritisak.
4. Odrežite višak materijala (samo B) na odgovarajuću dužinu.

Oprez

Koristite samo u ustanovama u kojima se nadzire skrb. Potreban je nadzor da ne bi došlo do slučajnog popuštanja traka za pričvršćivanje. Nemojte podrezivati trake za pričvršćivanje na kopči.

Držać mijenjajte svakodnevno ili češće prema potrebi. Promijeniti nakon kupanja bolesnika.

Za uporabu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Video s uputama za primjenu nalazi se na www.dalemed.com

Medicinski proizvodi Dale na raspolaganju su kod vašeg odabranog dobavljača bolničkog/medicinskog materijala.

Ne sadrži prirodni gumeni lateks.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale je registrirani zaštitni znak tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU i UK-u



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

