


Holder til Trakealkanyle

Brugsanvisning

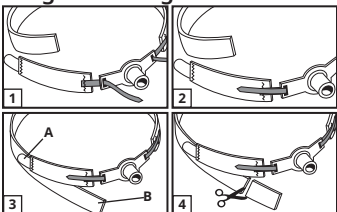

1. Før de lange, smalle klæbeflige gennem hullerne i trakealkanylens flange.
2. Buk fligene tilbage over flangen og fastgør dem til halsbåndet.
3. Klæbefligene på den korte del (**A**) af halsbåndet skal fastgøres på lange del (**B**). Juster halsbåndet, så det sidder godt til.
4. Klip overskydende materiale (**kun B**) af.

Forsigtig

Må kun anvendes i overvågede plejemiljøer. Kontrolleres jævnligt for at undgå, at holderen utilsigtet løsnes. Klæbefligene må ikke klippes til.

Udskift holderen dagligt eller oftere efter behov. Udskiftes efter patientvask.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale er et registreret varemærke tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

