


Houders voor Tracheostomiecanules

Instructies voor het Aanbrengen

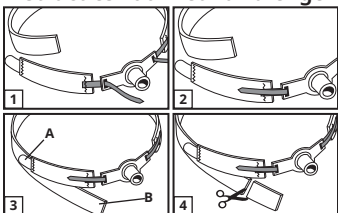

1. Rijk de lange, smalle bevestigingslipjes door de flenzen van het schildje.
2. Breng de lipjes terug over de flens en kleef ze aan de halsband.
3. Maak het bevestigingslipje van het korte gedeelte (A) vast aan het lange halsbandgedeelte (B). Stel de band af op de gewenste lengte of druk.
4. Knip het overtollige materiaal (B alleen) op de juiste lengte af.

Let op

Alleen onder toezicht gebruiken. Waak erover dat het geheel niet per ongeluk losraakt. De bevestigingslipjes niet bijknippen.

De houder dagelijks of zo nodig vaker vervangen. Vervangen na het wassen van de patiënt.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een videofilmje over het aanbrengen van de beha vindt u op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Octrooi www.dalemed.com/patents

Dale is een gedeponieerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland