


Trakeostoomakanyylin Pidikkeet

Käyttöohjeet

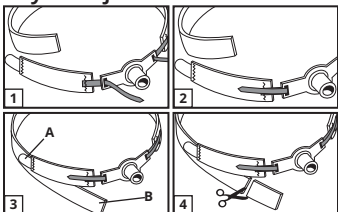

1. Pujota pitkät kapeat kiinnitysluskat trakeostoomalevyn kaulusten läpi.
2. Taivuta liuskat takaisin kauluksen yli ja kiinnitä kaulanauhaan.
3. Kiinnitä lyhyen osan (A) kiinnitysluska pitkään kaulanauhaosaan (B). Säädä pituus tai puristus sopivaksi.
4. Leikkaa ylimääräinen materiaali (vain B) pois, niin että pituus on sopiva.

Varoitus

Saa käyttää vain valvotussa hoitotilanteessa. Tarkkaile, ettei kiinnitys aukea vahingossa. Älä leikkaa kiinnitysluskoja.

Vaihda pidike päivittäin tai tarvittaessa useammin. Vaihda potilaan pesun jälkeen.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Patentti www.dalemed.com/patents

Dale on Dale Medical Products, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

