


Fixations pour Canule de Trachéotomie

Instructions pour l'Application

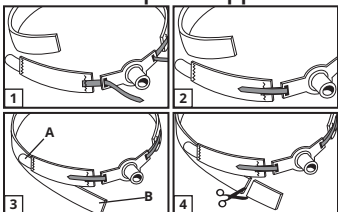

1. Faire passer les languettes d'attache longues et effilées à travers une bride de la plaque de trachéotomie.
2. Ramener les languettes en arrière, sur la bride, et les coller au collier.
3. Fixer la languette d'attache de la section courte (A) à la section longue du collier (B). Régler à la longueur ou à la pression adaptée.
4. Couper l'excédent de tissu (B **uniquement**) pour obtenir la longueur adaptée.

Attention

N'utiliser que si le patient est sous surveillance. Veiller à ce qu'un relâchement accidentel ne se produise pas. Ne pas couper les languettes d'attache.

Changer la fixation tous les jours ou plus souvent, selon les besoins. Changer après la toilette du patient.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Brevet www.dalemed.com/patents

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland